

Carrelli CartEsio
CartEsio Carts



9CA22

Versione cassette e Vassoi Praxis Standard ISO 3394
Version with drawers / Praxis trays (Standard ISO 3394)

9CA21

Versione cassette monodose e cassette stampati
Version with single-dose drug bin tray drawers and moulded drawers

9CA23

Versione antine
Version with doors

**9CA21****9CA22****9CA23**

9CA26
Versione porta PC
Version for PC



9CA26

9CA24
Versione portacartelle con cassette stampati
Version with filing compartment and moulded drawers



9CA24

9CA25
Versione portacartelle con cassettone
Version with filing compartment and filing drawer



9CA25

 **Favero Health Projects**

Dettagli costruttivi

Assembly details

CartEsio riassume sei linee di carrelli di alto livello qualitativo e tecnologico frutto di anni di esperienza di Favero Health Projects nel settore ospedaliero.

Ciascuna linea è stata pensata per risolvere specifiche necessità di trasporto come la movimentazione dei farmaci, materiali di supporto all'attività infermieristica, cartelle cliniche, documenti e di supporti informatici.

Alluminio e acciaio Inox sono l'anima di **CartEsio**, sinonimo di elevata qualità e durata nel tempo. L'alluminio prende varie forme e finiture per dar vita ad una scocca modulare, robusta e al tempo stesso leggera, sulla quale vengono inseriti i moduli specifici caratterizzanti le sei linee.

Le maniglie di spinta sono realizzate in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche, e in alluminio anodizzato per la versione ad antine.

The push handles are made in die-cast aluminium with an epoxy coated finish, and in anodized aluminium for the version provided with doors.

Le pareti esterne sono realizzate con pannelli in alluminio verniciati a polveri epossidiche.

The external walls are made from aluminium panels with an epoxy coated finish.

Ogni ruota monta un paracolpo girevole in materiale plastico morbido.

A soft plastic swivelling bumper is mounted above each castor

Alla base 4 ruote carenate in materiale plastico, girevoli su perno, di diametro 125 mm, di cui 2 con freno (poste su lato anteriore) e 2 girevoli.

The base is fitted with 4 plastic swivel castors, diameter 125 mm, 2 of which are provided with a brake (at the front).

CartEsio encompasses six lines of top quality technological carts, the result of Favero Health Projects years of experience in the hospital sector.

Each line has been conceived to meet specific transport requirements such as the movement of drugs, materials to aid nursing activities, the storage of clinical files or documents and computers or data carriers.

Aluminium and stainless steel are the core materials of **CartEsio**, denoting the high quality and durability of the range. The aluminium takes on various shapes and finishes to form a robust yet lightweight modular frame onto which specific characteristic modules can be inserted according to the line.

Le linee si differenziano anche per la tipologia dei top che possono essere in ABS o in MDF.

The lines are also differentiated by the top surfaces in ABS or MDF.

Barra supporto accessori in tubo di acciaio Inox su fianco destro.

Accessory rail support in tubular stainless steel is positioned on the right hand side.

Robusti montanti in alluminio anodizzato posizionati ai quattro angoli sono le colonne portanti della struttura.

Robust supports in anodized aluminium placed at the four corners are the load-bearing columns of the structure.

Le pareti interne e del fondo sono in alluminio.

The internal walls and base are in aluminium.



Leggero

L'utilizzo di leghe di alluminio rendono il carrello estremamente leggero.

Lightweight

The use of aluminium alloys makes the cart extremely lightweight.



Resistente alla corrosione

Leghe di alluminio e acciaio Inox assicurano un'ottima protezione contro la ruggine.

Corrosion resistant

Aluminium alloys and stainless steel ensure excellent protection against rust.



RUOTA CON PARACOLPI

Dettaglio ruota carenata in materiale plastico, girevole su perno, diametro 125 mm, con freno e paracolpo girevole in materiale plastico morbido.

CASTOR WITH BUMPER

Plastic swivel castor diameter 125 mm, with brake and swivelling bumper in soft plastic.



BARRA SUPPORTO ACCESSORI DI SERIE SUL LATO DESTRO

Barra supporto porta accessori realizzata in tubo di acciaio Inox (profilo 25 x 10 mm), dotata di fori per fissaggio alla struttura del carrello. Lunghezza utilizzabile: 37 cm.

STANDARD ACCESSORY RAIL SUPPORT ON RIGHT HAND SIDE

Tubular stainless steel accessory rail support (profile 25 x 10 mm), with pre-drilled holes for direct fastening to the cart frame. Useable length: 37 cm.

Piano in MDF

Top in MDF



Top specifico per la linea **9CA26** è realizzato in MDF con arrotondamenti laterali e bordo perimetrale per il contenimento dei liquidi.

*Top specific for the line **9CA26** is made in MDF with rounded sides and a edge rim for retaining liquids.*



La linea **9CA26** è dotata di un ripiano tastiera estraibile, realizzato in MDF, con bordi arrotondati, adatto per posizionare una tastiera e un mouse.

*The line **9CA26** is provided with a pull-out keyboard shelf made in MDF with rounded edges, suitable for holding a keyboard and a mouse.*

Il ripiano tastiera può essere estratto per un comodo utilizzo della tastiera e del mouse e riposto per limitare l'ingombro quando non viene utilizzato.

The keyboard shelf may be pulled out when the keyboard and mouse need to be used and simply stowed away when not in use, so not to take up space.

Piano in ABS
Top in ABS



Le versioni **9CA21**, **9CA22** e **9CA23** sono dotate di un top in ABS termoformato, con protezione antigraffio e alzatine di contenimento su tre lati. Anteriormente un bordo permette di contenere i liquidi versati accidentalmente sul piano.

*The versions **9CA21**, **9CA22** and **9CA23** are fitted with a top in thermoformed ABS, with scratchproof protection and liquid retaining elevated borders on three sides. A raised front edge permits the containment of liquids spilt accidentally on the top surface.*



La linea **9CA23** combina il top in ABS ad una maniglia con sagomatura ergonomica realizzata in tubo di alluminio anodizzato. Tale maniglia permette di aprire completamente le ante rimanendo così all'interno della protezione dei paracolpi.

*The **9CA23** line combines the ABS top with an ergonomically shaped handle made in tubular anodized aluminium. This handle permits the door to fully open while remaining within the protection area provided by the bumpers.*



1. Nel top sono presenti due boccole estetiche, poste ai due angoli posteriori, sotto le quali si trovano le predisposizioni per il fissaggio degli accessori.

***1.** Two aesthetic screw caps are located at the back two corners of the top, below which are found the accessory attachment ports.*



2. Tolate le boccole estetiche è possibile collocare i perni con la funzione di fissaggio e innesto accessori.

***2.** After removal of the screw caps, it is possible to insert the fixation bosses and mount the accessories.*



3. I perni permettono il fissaggio sul top del carrello di una vasta gamma di accessori in qualsiasi momento desideri il cliente.

***3.** The bosses permit the attachment of a vast range of accessories to the cart top, whenever the customer desires.*

Piano in MDF con ribalta
Sliding Top in MDF




Le linee **9CA24** e **9CA25** sono dotate di un top in MDF scorrevole, realizzato in due sezioni unite da cerniere, con arrotondamenti laterali e bordo perimetrale per il contenimento dei liquidi.

*The **9CA24** and **9CA25** lines present a sliding MDF top made in two sections joined by hinges, with rounded edges and corners and with a liquid retaining edge rim.*



Sulla parte superiore del top è fissata una maniglia in acciaio Inox con profilo arrotondato che facilita l'apertura a scorrimento del top.

A stainless steel handle is fixed to the top upper surface to facilitate sliding and opening.

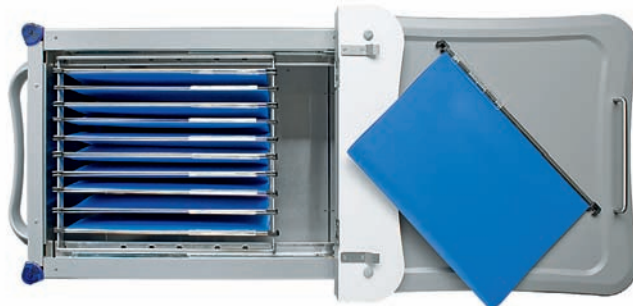

Il top delle linee **9CA24** e **9CA25** scorre su guide telescopiche. Facendo scorrere il top si può accedere al vano cartelle continuando ad utilizzarlo come piano di lavoro per scrivere o appoggiare oggetti. Ad apertura completa del top è altresì possibile accedere completamente al vano porta cartelle facendo ruotare una sezione del piano sulle cerniere che la uniscono alla sezione principale. Nell'ampio vano porta cartelle a pozzetto possono essere archiviati numerosi formati di cartelle. Attraverso una vasta gamma di supporti, per i quali il vano è già predisposto, si possono variare il formato e il numero di cartelle da inserire. Il top in MDF può essere facilmente rimosso dalle guide facilitando le operazioni di pulizia e disinfezione.

*The top of the **9CA24** and **9CA25** lines slides on telescopic guides. The filing compartment can be accessed by sliding the top backwards, while the top itself can be continuously used as a worktop for writing or supporting objects. To fully open the top and furthermore access the filing compartment fold back the small hinged section. In the spacious filing compartment a filing hanger support can be placed to archive various file formats. The filing compartment is designed to accommodate a vast range of file supports which can vary in both format and quantity. The MDF top can be easily removed from the guides facilitating cleaning and disinfection.*

Linea 9CA21

Versione cassette monodose e cassette stampati

Version with single-dose drug bin tray drawers and moulded drawers

Cod. 9CA2102

Carrello 9CA2102 (accessori esclusi)

Cart 9CA2102 (accessories not included)

Cod. 9CA9241

Kit fissaggio per dispenser

Dispenser attachment kit

Cod. 9CA6925

Dispenser 2 cassette a ribalta

Dispenser with 2 tilting bins

Cod. 9CA9214

Coppia di portarifiuti da 8 litri

Pair of 8 litre waste bins

Cod. 9CA9105

Tasca portacartelle laterale

Side chart/folder holder

Cod. 9CL6762

Cassetta 12 bins di dimensione utile
mm 108 x 273 x 42 h

*Bin tray drawer with 12 bins, useful
dimensions 108 x 273 x 42 h mm*

Cod. 9CL6763

Cassetta 8 bins di dimensione utile
mm 108 x 273 x 72 h

*Bin tray drawer with 8 bins, useful
dimensions 108 x 273 x 72 h mm*

Altezza massima: 1570 mm

Maximum height: 1570 mm


Esempio di configurazione con accessori

Example of the configuration with accessories



La linea 9CA21 è pensata per accogliere le cassette per la distribuzione monodose del farmaco. Le cassette possono essere abbinare a cassette monoscocca di diverse dimensioni stampati con tecnologia rotazionale.

line 9CA21 has been designed to accommodate the single-dose drug delivery drawers. These drawers can be combined with one-piece rotomoulded drawers available in various sizes.

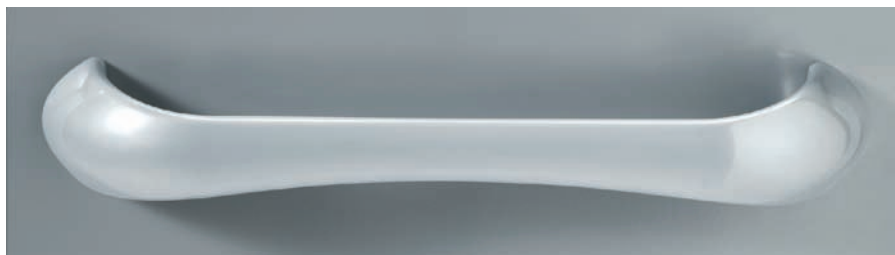

Maniglia sagomata con impugnatura ergonomica, realizzata in pressofusione di alluminio verniciata a polveri epossidiche.

Contoured handle with ergonomic grip made in die-cast aluminium with an epoxy coated finish.

Accessori specifici della linea 9CA21 Accessories specified for the line 9CA21

Cod. 9CL6762

Cassetta 12 bins di dimensione utile mm 108 x 273 x 42 h
Bin tray drawer with 12 bins, useful dimensions 108 x 273 x 42 h mm

Cod. 9CL6763

Cassetta 8 bins di dimensione utile mm 108 x 273 x 72 h
Bin tray drawer with 8 bins, useful dimensions 108 x 273 x 72 h mm



Grazie agli appositi incastri ed alla maniglia di presa per il trasporto, le cassette sono impilabili e di facile stoccaggio in farmacia.

Il bin è dotato di una maniglia frontale per afferrarlo sulla quale è ricavato lo spazio per un'etichetta. Al suo interno ha guide nelle quali si inseriscono i divisori: le guide sono studiate con una particolare forma che ne agevola la pulizia, mentre i divisori hanno un sistema di aggancio a scatto per evitarne la fuoriuscita accidentale. I divisori inoltre sono predisposti per l'applicazione di un'etichetta di dimensione uguale a quella montata sul frontale. Un coperchio trasparente e scorrevole permette infine di chiudere il bin mantenendo la visibilità del contenuto.

Dimensioni utili dei bins: mm 108 x 273 x 42 h - mm 108 x 273 x 72 h
The drawers may be easily stacked and stored in the pharmacy, thanks



to the special slotted design, while a carrier handle fitted on the top aids transportation.

The front of the bin is provided with a pull drawer handle on which there is a seat for a label. Inside each bin there are guides for inserting the dividers. The guides have been designed with a particular shape to facilitate cleaning, while the dividers present a catch-slot system to prevent accidental dislodgement.

The dividers are also designed for the application of a label equal in size to that mounted on the front of the bin. A transparent sliding cover allows the bin to be sealed while maintaining the visibility of the contents.

Useful dimensions of the bins: 108 x 273 x 42 h mm - 108 x 273 x 72 h mm



Cod. 9CA9201 - SERRATURA A CHIAVE CENTRALIZZATA

Serratura centralizzata posta nel fianco destro del carrello, chiude contemporaneamente tutti i cassetti e le cassette presenti nel carrello. Installabile solo in fase di produzione.

Cod. 9CA9201 - CENTRAL LOCK KEY

Central lock, located on the right hand side of the cart, simultaneously locks all of the bin tray drawers and standard drawers with in the cart. It is installable only at the time of production.

Linea 9CA21


Versione cassette monodose e cassetti stampati

Version with single-dose drug bin tray drawers and moulded drawers

- Le cassette e i cassetti scorrono su guide di acciaio fissate nelle fiancate e su ruotine. Cassette e cassetti possono essere facilmente rimossi dal carrello.
- Struttura realizzata con profili in alluminio anodizzato e pannellature completamente in alluminio verniciato a polveri epossidiche.
- Il vano interno è realizzato in lamiera di alluminio e le pareti laterali sono predisposte con tutte le forature per allestire tutte le configurazioni possibili.
- Top termoformato di serie realizzato in materiale plastico, con alzatine su tre lati e bordo anteriore rialzato per il contenimento dei liquidi.
- Il top è già predisposto per il fissaggio degli accessori sulla parte superiore.
- Maniglia sagomata di serie su lato sinistro con impugnatura ergonomica, realizzata in pressofusione di alluminio verniciato a polveri epossidiche.
- Barra di supporto accessori di serie su lato destro realizzata in tubo di acciaio Inox, lunghezza utilizzabile 37 cm.
- Alla base 4 ruote carenate in materiale plastico, girevoli su perno, di diametro 125 mm, di cui 2 con freno (poste su lato anteriore) e 2 girevoli. Ogni ruota monta un paracolpo girevole in materiale plastico morbido.

Dimensioni Carrelli: b 782 mm - p 597 mm - h 1140 mm


Altezza piano di lavoro: 1100 mm

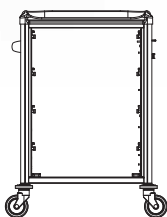

Cod. 9CA2100

Carrello dotato di 4 vani per accogliere 4 cassette per la distribuzione monodose. Cassette monodose non incluse.

Cart with 4 compartments to accommodate 4 single-dose drug delivery bin tray drawers. Single-dose drug bin tray drawers not included.

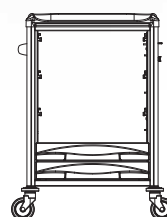


Cod. 9CA2101

Carrello dotato di 3 vani per accogliere 3 cassette per la distribuzione monodose e di 2 cassetti h 100 mm. Cassette monodose non incluse.

Cart with 3 compartments to accommodate 3 single-dose drug delivery bin tray drawers and 2 drawers h 100 mm. Single-dose drug bin tray drawers not included.

- The bin tray drawers and standard drawers slide on rollers and steel runners fastened to the side panels. Both sets of drawers can be easily removed from the cart.
- Structure made in anodized aluminium supports and aluminium panelling with an epoxy coated finish.
- The interior compartment is made from sheet aluminium and the side panels are provided with pre-drilled holes necessary for all possible configurations.
- Top in thermoformed plastic with elevated borders on three sides and a raised front edge to retain spilt liquids.
- The worktop is pre-configured for the attachment of upper section accessories.
- Standard contoured handle on the left hand side with an ergonomic grip made in die-cast aluminium with an epoxy coated finish.
- As standard, tubular stainless steel accessory rail support on the right hand side, useable length 37 cm.
- The base is fitted with 4 plastic swivel castors, diameter 125 mm, 2 of which are provided with a brake (at the front). A soft plastic swivelling bumper is mounted above each castor.


Cart Dimensions: l 782 mm - b 597 mm - h 1140 mm
Worktop height: 1100 mm

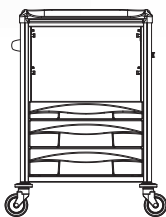

Cod. 9CA2102

Carrello dotato di 2 vani per accogliere 2 cassette per la distribuzione monodose, di 1 cassetto h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm. Cassette monodose non incluse.

Cart with 2 compartments to accommodate 2 single-dose drug delivery bin tray drawers, 1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 150 mm. Single-dose drug bin tray drawers not included.

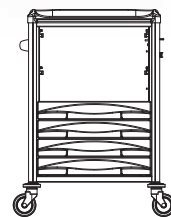

Cod. 9CA2103

Carrello dotato di 2 vani per accogliere 2 cassette per la distribuzione monodose e di 4 cassetti h 100 mm. Cassette monodose non incluse.

Cart with 2 compartments to accommodate 2 single-dose drug delivery bin tray drawers and 4 drawers h 100 mm. Single-dose drug bin tray drawers not included.

Linea 9CA22

Versione cassetti e vassoi Praxis Standard ISO 3394

Version with Praxis drawers and trays (Standard ISO 3394)

Cod. 9CA2201

Carrello 9CA2201 (accessori esclusi)

Cart 9CA2201 (accessories not included)

Cod. 9CA9240

Tubo ad arco per fissaggio accessori

Arc shaped tube for attaching accessories

Cod. 9CA6909

Supporto porta guanti singolo

Single glove box holder

Cod. 9CA6908

Supporto cestino aghi usati rotondo

Round support for sharps container

Cod. 9CL6901

Mensola supporto con 2 vaschette

Bracket support with 2 trays

Cod. 9CA9212

Portarifiuti medio da 14 litri

Medium size waste bin 14 litre

Cod. 9CA9105

Tasca portacartelle laterale

Side chart/folder holder

Altezza massima: 1590 mm

Maximum height: 1590 mm

Esempio di configurazione con accessori

Example of the configuration with accessories



La linea 9CA22 è pensata per accogliere al suo interno le guide in ABS termoformato tipiche della linea Praxis. Su tali guide possono essere inseriti i cassetti "Praxis" (ovvero vassoi Praxis ISO 3394 con fissato un frontalino in materiale plastico) oppure si possono realizzare configurazioni miste cassetti "Praxis" con vassoi "Praxis".

Line 9CA22 has been designed to accommodate the thermoformed ABS guide rails typical of the Praxis range. "Praxis" drawers (that is, Praxis trays ISO 3394, with a plastic drawer front attached) may be inserted onto these guide rails; or alternatively a combined configuration of "Praxis" drawers and "Praxis" trays can be chosen.



Maniglia sagomata con impugnatura ergonomica, realizzata in pressofusione di alluminio verniciata a polveri epossidiche.

Contoured handle with ergonomic grip made in die-cast aluminium with an epoxy coated finish.

I cassetti sono stampati in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con guide interne per accogliere divisori.

Il frontale ha una maniglia co-stampata e incassata dalla forma ergonomica.

I cassetti scorrono sulle guide delle fiancate interne al carrello.

I fermi presenti sul cassetto ne evitano estrazioni accidentali.

Le dimensioni rispettano pienamente le Norme ISO 3394.

The drawers are moulded in semi-transparent high-strength plastic with internal guides to accommodate dividers.

The drawer front has an ergonomically shaped integrated moulded drawer pull handle.

The drawers slide on the guide rails of the cart internal side panels.

Safety stops on the drawer prevent accident extraction.

Dimensions fully compliant with ISO 3394.



Cod. 9CA9205

Cassetto ISO 3394 h 50

Dimensioni struttura: mm 600 x 400 x 50 h

Drawer ISO 3394 h 50

Dimensions: 600 x 400 x 50 h mm




Cod. 9CA9206

Cassetto ISO 3394 h 100

Dimensioni struttura: mm 600 x 400 x 100 h

Drawer ISO 3394 h 100

Dimensions: 600 x 400 x 100 h mm

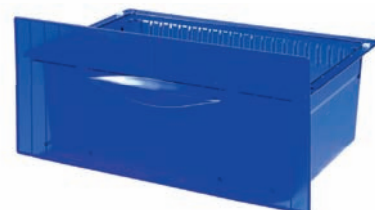

Cod. 9CA9207

Cassetto ISO 3394 h 200


Dimensioni struttura: mm 600 x 400 x 200 h

Drawer ISO 3394 h 200


Dimensions: 600 x 400 x 200 h mm

Schema modularità cassetti


Drawer configuration diagrams

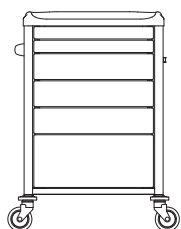


9CA2201

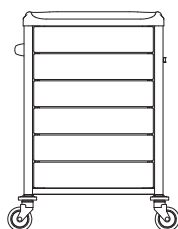


9CA2202

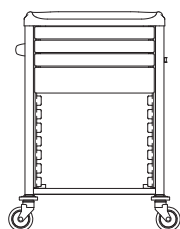


9CA2203

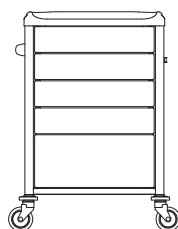

9CA2204

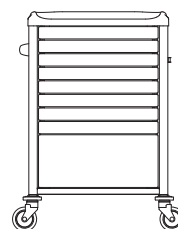

9CA2205

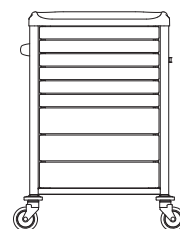

9CA2206

Linea 9CA22

Versione cassetti e vassoi Praxis Standard ISO 3394

Version with Praxis drawers and trays (Standard ISO 3394)

- Il carrello è predisposto con 2 fiancate in ABS termoformate con guide per accogliere vassoi, cassetti o ripiani di dimensioni Standard ISO 3394 (cm 60 x 40).
- I vassoi e i cassetti scorrono sulle guide in ABS dotate di sedi sulle quali si incastrano i fermi dei vassoi o dei cassetti, la loro forma li rende facilmente lavabili e sanificabili.
- Struttura realizzata con profili in alluminio anodizzato e pannellature completamente in alluminio verniciato a polveri epossidiche.
- Il vano interno è realizzato in lamiera di alluminio e nelle pareti laterali sono fissate le due fiancate in ABS.
- Top termoformato di serie realizzato in materiale plastico, con alzatine su tre lati e bordo anteriore rialzato per il contenimento dei liquidi. Il top è già predisposto per il fissaggio degli accessori sulla parte superiore.
- Maniglia sagomata di serie su lato sinistro con impugnatura ergonomica, realizzata in pressofusione di alluminio verniciata a polveri epossidiche.
- Barra di supporto accessori di serie su lato destro realizzata in tubo di acciaio Inox, lunghezza utilizzabile 37 cm.
- Alla base 4 ruote carenate in materiale plastico, girevoli su perno, di diametro 125 mm, di cui 2 con freno (poste su lato anteriore) e 2 girevoli. Ogni ruota monta un paracolpo girevole in materiale plastico morbido.

Dimensioni Carrelli: b 782 mm - p 597 mm - h 1140 mm

Altezza piano di lavoro: 1100 mm



Cod. 9CA2200

Carrello dotato di 2 fiancate interne in ABS per accogliere vassoi e cassetti Standard ISO 3394, o ripiani.

The cart is fitted with 2 internal side panels in ABS to accommodate trays and drawers (Standard ISO 3394), or shelves.



Cod. 9CA2201

Il carrello è allestito con 6 cassetti in tre diverse altezze (2 da 50 mm, 3 da 100 mm, 1 da 200 mm). Tutti i cassetti sono accessoriabili con divisori.

The cart is fitted with 6 drawers of three different heights (two 50 mm, three 100 mm, one 200 mm). All the drawers can be accessorized with dividers.

- The cart is fitted with 2 side panels in thermoformed ABS with guide rails to accommodate trays, drawers or shelves sized to Standard ISO 3394 (60 x 40 cm).
- The trays or drawers slide on ABS guide rails and are fitted with seats to engage with the safety stops; the guide rail shape facilitates easy cleaning and disinfection.
- Structure made in anodized aluminium supports and aluminium panelling with an epoxy coated finish.
- The interior compartment is made in sheet aluminium while the two side panels in ABS are fastened directly to the side walls of the frame..
- Top in thermoformed plastic with elevated borders on three sides and a raised front edge to retain spilt liquids. The worktop is pre-configured for the attachment of upper section accessories.
- Standard contoured handle on the left hand side with an ergonomic grip made in die-cast aluminium with an epoxy coated finish.
- As standard, tubular stainless steel accessory rail support on the right hand side, useable length 37 cm.
- The base is fitted with 4 plastic swivel castors, diameter 125 mm, 2 of which are provided with a brake (at the front). A soft plastic swivelling bumper is mounted above each castor.

Cart Dimensions: l 782 mm - b 597 mm - h 1140 mm
Worktop height: 1100 mm



Cod. 9CA2202

Il carrello è allestito con 6 cassetti di uguale altezza da 100 mm. Tutti i cassetti sono accessoriabili con divisori.

The cart is fitted with 6 identical drawers of height 100 mm. All the drawers can be accessorized with dividers.



Cod. 9CA2203

Il carrello è allestito con 4 cassetti in due diverse altezze (tre da 50 mm, uno da 100 mm). Tutti i cassetti sono accessoriabili con divisori.

The cart is fitted with 4 drawers of two different heights (three 50 mm, one 100 mm). All the drawers can be accessorized with dividers.

Cod. 9CA2300

Carrello 9CA2300 (accessori esclusi)

Cart 9CA2300 (accessories not included)

Cod. 9CL9240

Tubo ad arco per fissaggio accessori

Arc shaped tube for attaching accessories

Cod. 9CL6927

Lampada a batteria ricaricabile

Rechargeable battery lamp

Altezza massima: 1590 mm

Maximum height: 1590 mm

Esempio di configurazione con accessori

Example of the configuration with accessories



La **linea 9CA23** è pensata per gestire cartelle e materiale con sistema di chiusura ad antine, dotate di serratura a chiave e di un'apertura di 260°.

Line 9CA23 has been designed for the organization of charts/folders and materials and is composed of a door closing system provided with a lockkey and with a door opening angle of 260°.



Bianco
White



Acquamarina
Aquamarine



Verde
Green



Le antine sono fissate su robuste cerniere in acciaio Inox design esclusivo di Favero Health Projects, e la forma si sposa perfettamente con il profilo del montante in alluminio.

The doors are mounted onto a set of robust stainless steel hinges, exclusively designed for Favero Health Projects so that the shape perfectly matches the aluminium frame.




L'antina nella posizione di apertura massima è sempre all'interno dell'ingombro delle maniglie di spinta del carrello, senza causare intralcio per la movimentazione.

The door in the fully open position remains at all times within the gross dimensions of the cart push handles, without hindering the movement.



Su entrambi i lati del carrello è fissata una maniglia con sagomatura ergonomica realizzata in tubo di alluminio anodizzato. Le maniglie consentono l'apertura completa delle ante.

An ergonomically shaped handle in anodized tubular aluminium is fixed to both sides of the cart. The position of the handles allows the doors to be fully opened.

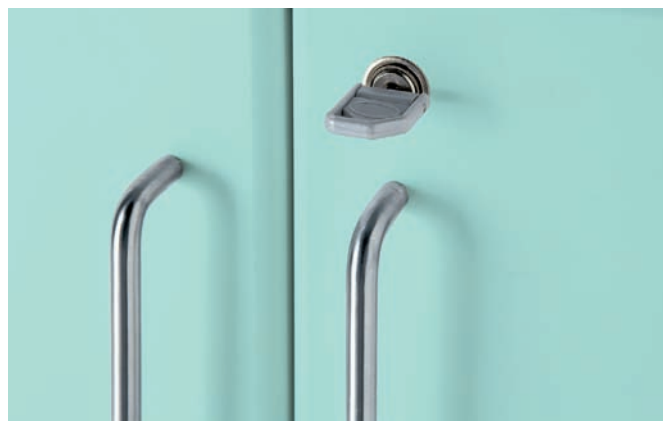

Su entrambe le antine è fissata una maniglia in acciaio Inox con profilo arrotondato. Una serratura con chiave antitrauma chiude entrambe le antine.

A rounded profile stainless steel handle is fixed to each door. An anti-trauma key lock closes both doors.

Linea 9CA23
Versione antine
Version with doors

- Le ante sono realizzate in MDF con bordo arrotondato. Maniglie in acciaio inox per una facile pulizia e serratura con chiave antitrauma di chiusura. Sulle fiancate laterali esterne sono installati dei ritegni per mantenere le ante aperte in sicurezza anche durante la movimentazione del carrello.
- Le cerniere sono realizzate in acciaio inox e integrate nei montanti, permettono di aprire le ante fino ad un angolo di circa 260° rimanendo sempre all'interno dell'ingombro delle maniglie di spinta.
- Struttura realizzata con profili in alluminio anodizzato e pannellature completamente in alluminio verniciato a polveri epossidiche
- Il vano interno è realizzato in lamiera di alluminio e nelle pareti laterali sono fissate le due fiancate in ABS (per i modelli che lo prevedono).
- Top termoformato di serie realizzato in materiale plastico, con alzatine su tre lati e bordo anteriore rialzato per il contenimento dei liquidi. Il top è già predisposto per il fissaggio degli accessori sulla parte superiore.
- Maniglia sagomata di serie su entrambi i lati con impugnatura ergonomica, realizzata in alluminio anodizzato che permettono la spinta del carrello da ambo i lati.
- Alla base 4 ruote carenate in materiale plastico, girevoli su perno, di diametro 125 mm, di cui 2 con freno (poste su lato anteriore) e 2 girevoli. Ogni ruota monta un paracolpo girevole in materiale plastico morbido.

Dimensioni Carrelli: b 900 mm (larghezza maniglie) - p 597 mm - h 1140 mm
Altezza piano di lavoro: 1100 mm



Cod. 9CA2300

Carrello dotato di 2 ante con serratura a chiave e 2 fiancate interne in ABS per accogliere vassoi e ripiani (Standard ISO 3394). Fornito di serie con ripiano in HPL di dimensioni 425 x 600 x 10 h mm.

Cart with 2 doors, key lock and 2 internal side panels in ABS to accommodate shelves and trays (Standard ISO 3394). Supplied as standard with HPL shelf; size 425 x 600 x 10 h mm.

Cod. 9CA2301

Carrello dotato di 2 ante con serratura a chiave, casellario a 12 posti formato A4 con separatori in Plexiglas (dimensione singolo posto: b 48 mm, p 425 mm, h 280 mm). Lo spazio restante è allestito con fiancate in ABS per accogliere vassoi e ripiani (Standard ISO 3394).

Cart with 2 doors, key/lock and filing section containing 12 compartments; size A4 with dividers in Plexiglas (single compartment dimensions: l 48 mm, b 425 mm, h 280 mm). The remaining space is fitted with ABS side panels to accommodate both shelves and trays (Standard ISO 3394).

Cod. 9CA2302

Carrello dotato di 2 ante con serratura a chiave, 2 casellari a 12 posti formato A4 con separatori in Plexiglas (dimensione singolo posto: b 48 mm, p 425 mm, h 280 mm). Lo spazio sottostante rimane libero per deposito oggetti.

Cart with 2 doors, key/lock and 2 filing sections each containing 12 compartments; size A4 with dividers in Plexiglas (single compartment dimensions: l 48 mm, b 425 mm, h 280 mm). The lower compartment space is free for storage purposes.

- The doors are made in MDF with a rounded border. Stainless steel handles for easy cleaning and an anti-trauma key lock for secure closure. Catches are mounted to the external side panels to safely keep the doors open even when the cart is being moved.
- The stainless steel hinges are integrated into the supports allowing the doors to open up to an angle of approximately 260° while remaining at all times within the gross dimensions of the push handles.
- Structure made in anodized aluminium supports and aluminium panelling with an epoxy coated finish.
- The interior compartment is made in sheet aluminium while the two side panels in ABS are fastened directly to the side walls of the frame (for certain models).
- Top in thermoformed plastic with elevated borders on three sides and a raised front edge to retain spilt liquids. The worktop is pre-configured for the attachment of upper section accessories.
- Standard contoured handle on both sides with an ergonomic grip made in anodized aluminium enables the cart to be pushed from both ends.
- The base is fitted with 4 plastic swivel castors, diameter 125 mm, 2 of which are provided with a brake (at the front). A soft plastic swivelling bumper is mounted above each castor.

Cart Dimensions: l 900 mm (handle width) - b 597 mm - h 1140 mm
Worktop height: 1100 mm



Cod. 9CA2303

Carrello dotato di 2 ante con serratura a chiave, 1 casellario a 12 posti formato A4 con separatori in Plexiglas (dimensione singolo posto: b 48 mm, p 425 mm, h 280 mm) e 1 casellario a 12 posti formato A3 con separatori in Plexiglas (dimensione singolo posto b 48 p 425 h 464).

Cart with 2 doors, key/lock, 1 filing section containing 12 compartments; size A4 with dividers in Plexiglas (single compartment dimensions: l 48 mm, b 425 mm, h 280 mm) and 1 filing section containing 12 compartments; size A3 with dividers in Plexiglas (single compartment dimensions: l 48 b 425 h 464 mm).



Cod. 9CA2304

Carrello dotato di 2 ante con serratura a chiave, casellario a 12 posti formato A3 con separatori in Plexiglas (dimensione singolo posto: b 48 mm, p 425 mm, h 464 mm). Lo spazio sottostante rimane libero per deposito oggetti.

Cart with 2 doors, key/lock and filing section containing 12 compartments; size A3 with dividers in Plexiglas (single compartment dimensions: l 48 mm, b 425 mm, h 464 mm). The lower compartment space is free for storage purposes.

Per gli accessori con codice evidenziato con simbolo * è necessario scegliere un tipo di tubo di fissaggio. La scelta può essere fatta tra un tubo singolo, **cod. 9CA9242** qualora l'accessorio sia singolo oppure siano più accessori ma di piccole dimensioni, o un tubo ad arco **cod. 9CA9240** qualora gli accessori siano più d'uno oppure necessitino del doppio aggancio.

*For accessories highlighted with the symbol * it is necessary to select a form of tubing attachment. The selection lies between a single tube **cod. 9CA9242** in the case of a single accessory or several small accessories, or an arc shaped tube **cod. 9CA9240** in the case of more than one accessory or where a double attachment is required.*



Cod. 9CA9242

Tubo singolo realizzato in acciaio Inox, diametro 28 mm, per fissaggio accessori nella parte superiore del carrello (predisposizione per il fissaggio già presente).

Single stainless steel tube, diameter 28 mm, for attachment of accessories to the upper section of the cart (configured for direct attachment).



Cod. 9CA9240

Tubo ad arco realizzato in acciaio Inox, diametro 28 mm, per fissaggio accessori nella parte superiore del carrello (predisposizione per il fissaggio già presente).

Arc shaped stainless steel tube, diameter 28 mm, for attachment of accessories to the upper section of the cart (configured for direct attachment).

* Montabile con accessorio cod. 9CA9240 e cod. 9CA9242
 * Attachable with the accessories; code 9CA9240 and code 9CA9242



Cod. 9CL6901*
 Mensola supporto con 2 vaschette
Bracket support with 2 trays



Cod. 9CL6903*
 Mensola supporto con ripiano inox
Bracket support with stainless steel shelf



Cod. 9CL6921*
 Supporto con vaschetta disinfezione
Support with disinfection basin



Art. 9CL6907*
 Supporto cestino aghi usati quadrato
 (standard 160 x 160 ma personalizzabile)
*Square support for sharps container
 (standard 160 x 160 but customizable)*



Cod. 9CL6908*
 Supporto cestino aghi usati rotondo
 (standard d 210 ma personalizzabile)
*Round support for sharps container
 (standard dia. 210 but customizable)*



Cod. 9CL6927*
 Lampada a batteria ricaricabile
Lamp with rechargeable battery



Cod. 9CL6909*
 Supporto porta guanti singolo
Single glove box holder



Cod. 9CL6910*
 Supporto porta guanti multiplo
Multiple glove box holder



Cod. 9CL6917*
 Apriampolle
Ampoule breaker



Cod. 9CL6902
 Dispenser con sei vaschette
Dispenser with 6 trays



Cod. 9CL6904
 Dispenser 10 cassetti a ribalta
Dispenser with 10 tilting bins



Cod. 9CL6925
 Dispenser 2 cassetti a ribalta 4 vani ciascuno
*Dispenser with 2 tilting bins each containing
 4 compartments*

9CA24

Versione portacartelle con cassetti stampati

Version with filing compartment and moulded drawers

Cod. 9CA2402

Carrello 9CA2402 (accessori esclusi)

Cart 9CA2402 (accessories not included)

Cod. 9CA9213

Portarifiuti grande da 20 litri

Large waste bin 20 litre

Cod. 9CA9105

Tasca portacartelle laterale

Side chart/folder holder

Esempio di configurazione con accessori

Example of the configuration with accessories



La **linea 9CA24** è pensata per gestire documentazione attraverso delle cartelle. Un piano ad apertura scorrevole di dimensioni generose può essere utilizzato come piano scrittoio. Una chiusura centralizzata a chiave blocca l'apertura del ripiano e dei cassetti. Il piano di lavoro è posto a 1130 mm e il carrello può essere dotato di cassetti stampati in monoblocco con maniglia antitrauma incorporata.

Line 9CA24 is designed for the organization of documents in charts/folders. The generous size slide-opening worktop can be utilized as a writing surface. A central locking system locks both the worktop and drawers. The worktop is positioned at 1130 mm from the ground and the cart is fitted with one-piece moulded drawers with an integrated anti-trauma drawer pull handle.



Sulla parte superiore del top è fissata una maniglia in acciaio inox con profilo arrotondato che facilita l'apertura a scorrimento del top.

A rounded profile stainless steel handle is fixed to the upper surface of the worktop to facilitate sliding and opening.



Chiusura centralizzata con chiave antitrauma per la chiusura simultanea del top scorrevole e dei cassetti (se presenti).

Central locking system with anti-trauma key for simultaneous locking of the sliding worktop and drawers, (if present).



Maniglia sagomata con impugnatura ergonomica, realizzata in pressofusione di alluminio, verniciata a polveri epossidiche.

Contoured handle with an ergonomic grip made in die-cast aluminium with an epoxy coated finish.



Il cassetto è dotato di guide telescopiche che ne consentono un totale accesso. Il cassetto può essere rimosso.

The drawer is fitted with telescopic guides for total access and is also removable.



Nell'ampio vano porta cartelle a pozzetto possono essere archiviati numerosi formati di cartelle. Attraverso una vasta gamma di supporti, per i quali il vano è già predisposto, si possono variare il formato e il numero di cartelle da inserire.

Various formats of folders can be filed in the spacious filing compartment. The filing compartment is designed to accommodate a vast range of supports allowing the format and number of folders/charts to be varied.

9CA24

Versione portacartelle con cassetti stampati

Version with filing compartment and moulded drawers

- Nel vano a pozzetto possono essere installati in qualsiasi momento supporti cartelle rimovibili (accessori) che consentono di accogliere cartelle di diverso formato A4, A3 o formato A4 speciale. Disponibile anche porta cartelle a soffietto.
- Dotato di chiusura centralizzata con chiave antitrauma per la chiusura simultanea del top scorrevole e dei cassetti presenti.
- Struttura realizzata con profili in alluminio anodizzato e pannellature completamente in alluminio verniciato a polveri epossidiche.
- Il vano inferiore è realizzato in lamiera di alluminio e nelle pareti laterali sono fissati i cassetti, le pareti laterali sono predisposte con tutte le forature per allestire tutte le configurazioni possibili.
- Top realizzato in MDF sezionato per consentire un totale accesso al vano a pozzetto, scorrevole su guide telescopiche dotate di sistema per la rimozione del piano. È presente una maniglia di acciaio per aprire e chiudere il top in completa sicurezza.
- Maniglia sagomata di serie su lato sinistro con impugnatura ergonomica, realizzata in pressofusione di alluminio verniciata a polveri epossidiche.
- Barra di supporto accessori di serie su lato destro realizzata in tubo di acciaio Inox, lunghezza utilizzabile 37 cm.
- Alla base 4 ruote carenate in materiale plastico, girevoli su perno, di diametro 125 mm, di cui 2 con freno (poste su lato anteriore) e 2 girevoli. Ogni ruota monta un paracolpo girevole in materiale plastico morbido.

Dimensioni Carrelli: b 782 mm - p 597 mm - h 1172 mm

Altezza piano di lavoro: 1135 mm



Cod. 9CA2400

Carrello porta cartelle a pozzetto con ripiano scorrevole e vano inferiore predisposto con 2 fiancate in ABS termoformate con guide per accogliere vassoi ripiani di dimensioni Standard ISO 3394 (mm 600 x 400).

Cart with filing compartment, sliding worktop and a base compartment fitted out with 2 interior thermoformed ABS side panels with guide rails to accommodate shelves and trays to Standard ISO 3394 (600 x 400 mm).



Cod. 9CA2401

Carrello porta cartelle a pozzetto con ripiano scorrevole, il vano inferiore allestito con 1 cassetto h 150 mm stampato in monoscocca con maniglia antitrauma integrata. Il cassetto è rimovibile e dotato di guide telescopiche per il totale accesso. La sua forma lo rende facilmente pulibile e sanificabile. Spazio sottostante per deposito oggetti.

Cart with filing compartment, sliding worktop and base compartment fitted with a 1 one-piece moulded drawer h 150 mm with integrated anti-trauma drawer pull handle. The standard drawer is fitted with telescopic guides for full access as well as a removal system. The shape of the drawer makes it easy to clean and disinfect. The underlying space can be used for storage purposes.

- Removable filing hanger supports (accessories) may be installed at any time in the filing compartment to accommodate different chart formats, A4, A3 or A4 special format. Suspension link files are also available.
- Central locking system with anti-trauma key for simultaneous locking of the sliding worktop and drawers, if present.
- Structure made in anodized aluminium supports and aluminium panelling with an epoxy coated finish.
- The base compartment is made from sheet aluminium with the drawers fitted into the side walls; the side panels are provided with pre-drilled holes necessary for all possible configurations.
- Top in two MDF sections is designed to allow full access to the filing compartment. It slides on telescopic guides and is provided with a system for removal of the worktop surface. The presence of a steel handle facilitates easy and safe opening and closing.
- Standard contoured handle on the left hand side with an ergonomic grip made in die-cast aluminium with an epoxy coated finish.
- As standard tubular stainless steel accessory rail support on the right hand side, useable length 37 cm.
- The base is fitted with 4 plastic swivel castors, diameter 125 mm, 2 of which are provided with a brake (at the front). A soft plastic swivelling bumper is mounted above each castor.

Cart Dimensions: l 782 mm - b 597 mm - h 1172 mm
Worktop height: 1135 mm



Cod. 9CA2402

Carrello porta cartelle a pozzetto con ripiano scorrevole, il vano inferiore allestito con 1 cassetto h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm stampati in monoscocca con maniglia antitrauma integrata. Tutti i cassetti sono rimovibili e dotati di guide telescopiche per il totale accesso. La loro forma li rende facilmente pulibili e sanificabili.

Cod. 9CA2402

Cart with filing compartment, sliding worktop and base compartment fitted with one h 100 mm and two h 150 mm one-piece moulded drawers with integrated anti-trauma drawer pull handle. All standard drawers are fitted with telescopic guides for full access as well as a removal system. The shape of the drawers makes them easy to clean and disinfect.

Linea 9CA25

Versione portacartelle con cassettone

Version with filing compartment and filing drawer

La linea 9CA25 è pensata per gestire documentazione attraverso delle cartelle. Un piano ad apertura scorrevole di dimensioni generose può essere utilizzato come piano scrittoio. Una chiusura centralizzata a chiave blocca l'apertura del ripiano e del cassettone.

- Nel vano a pozzetto e nel cassettone possono essere installati in qualsiasi momento supporti cartelle rimovibili (accessori) che consentono di accogliere cartelle di diverso formato A4, A3 o A4 speciale per il pozzetto e formato A4 e formato A4 speciale per il cassettone.
- Dotato di chiusura centralizzata con chiave antitrauma per la chiusura simultanea del top scorrevole e del cassettone.
- Struttura realizzata con profili in alluminio anodizzato e pannellature completamente in alluminio verniciato a polveri epossidiche.

- Top realizzato in MDF sezionato per consentire un totale accesso al vano a pozzetto, scorrevole su guide telescopiche dotate di sistema per la rimozione del piano. È presente una maniglia di acciaio per aprire e chiudere il top in completa sicurezza.
- Maniglia sagomata di serie su lato sinistro con impugnatura ergonomica, realizzata in pressofusione di alluminio verniciata a polveri epossidiche.
- Alla base 4 ruote carenate in materiale plastico, girevoli su perno, di diametro 125 mm, di cui 2 con freno (poste su lato anteriore) e 2 girevoli. Ogni ruota monta un paracolpo girevole, in materiale plastico morbido.

Dimensioni Carrelli: b 782 mm - p 597 mm - h 1010 mm
Altezza piano di lavoro: 975 mm

Esempio di configurazione con accessori Example of the configuration with accessories



Cod. 9CA2500

Carrello porta cartelle a pozzetto con ripiano scorrevole, il vano inferiore allestito con cassettone h 300 mm con struttura in acciaio inox e frontale stampato in monoscocca con maniglia antitrauma integrata. Il cassettone è dotato di guide telescopiche per il totale accesso e di sistema di rimozione.

Cart with filing compartment, sliding worktop and base compartment fitted with a filing drawer h 300 mm. The drawer is made from a stainless steel frame and a one-piece moulded drawer front with an integrated anti-trauma drawer pull handle. The filing drawer is fitted with telescopic guides for total access as well as a system for removal.

Cod. 9CA2500

Carrello 9CA2500

Cart 9CA2500

Cod. 9CA9214

Coppia di portarifiuti da 8 litri

Pair of 8 litre waste bins

Cod. 9CA9105

Tasca portacartelle laterale

Side chart/folder holder



Line 9CA25 has been designed to organize documentation in charts/folders. The generous size slide-opening worktop can be utilized as a writing surface. A central locking system locks both the worktop and filing drawer.

- Removable file hanger supports (accessories) may be installed at any time in the filing compartment and filing drawer to accommodate different chart/folder formats. Files sizes of A4, A3 or A4 special format can be stored in the top compartment while sizes A4 and A4 special can be stored in the lower drawer.
- Central locking system with anti-trauma key for simultaneous locking of the sliding worktop and filing drawer.
- Structure made in anodized aluminium supports and aluminium panelling with an epoxy coated finish.
- Top in two MDF sections is designed to allow full access to the filing compartment. It slides on telescopic guides and is provided with a work surface removal system. The presence of a steel handle facilitates easy and safe opening and closing.
- Standard contoured handle on the left hand side with ergonomic grip, made in pressure die-cast aluminium with an epoxy coated.
- The base is fitted with 4 plastic swivel castors, diameter 125 mm, 2 of which are provided with a brake (at the front). A soft plastic swivelling bumper is mounted above each castor.

Cart Dimensions: l 782 mm - b 597 mm - h 1010 mm
Worktop height: 975 mm




Sulla parte superiore del top è fissata una maniglia in acciaio inox con profilo arrotondato che facilita l'apertura a scorrimento del top.

A rounded profile stainless steel handle is fixed to the upper worktop surface to facilitate sliding and opening.



Chiusura centralizzata con chiave antitrauma per la chiusura simultanea del top scorrevole e dei cassetti se presenti.

Central locking system with anti-trauma key for simultaneous locking of the sliding worktop and drawers, if present.

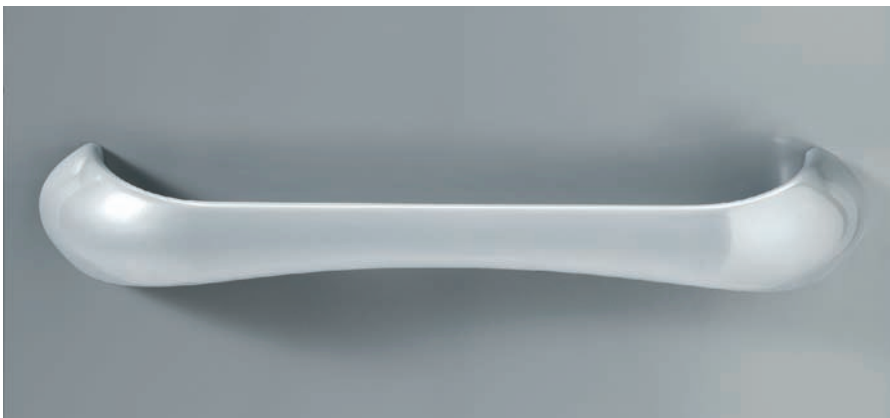

Maniglia sagomata con impugnatura ergonomica, realizzata in pressofusione di alluminio verniciata a polveri epossidiche.

Contoured handle with an ergonomic grip made in die-cast aluminium with an epoxy coated finish.



Cassettone dotato di guide telescopiche e di sistema di rimozione. Struttura in acciaio Inox e frontale stampato in monoscocca con maniglia.

The filing drawer is fitted with telescopic guides and a system for removal. The drawer is made from a stainless steel frame and a one-piece moulded drawer front with drawer pull handle.



Cod. 9CA9231

SUPPORTO CARTELLE FORMATO A4

Kit costituito da telaio di supporto rimovibile e n° 20 porta cartelle per documenti di formato A4.

Installabile su vano a pozzetto nei carrelli 9CA24 e 9CA25.


Installabile su vano cassettone nel carrello 9CA25.

HANGER SUPPORT FOR SIZE A4 FOLDERS

Kit consisting of a removable hanger support frame and 20 folders suitable for size A4 documents.

Can be installed in the top filing compartment of carts 9CA24 and 9CA25.

Can be installed in the filing drawer of cart 9CA25.

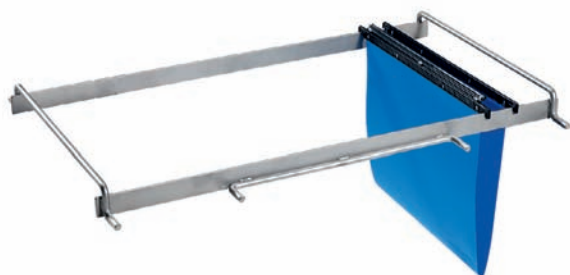

Cod. 9CA9234

SUPPORTO 35 CARTELLE FORMATO A4


Kit costituito da telaio di supporto rimovibile e n° 35 porta cartelle per documenti di formato A4.

Installabile su vano a pozzetto nei carrelli 9CA24 e 9CA25.

HANGER SUPPORT FOR 35 SIZE A4 FOLDERS

Kit consisting of a removable hanger support frame and 35 folders suitable for size A4 documents.

Can be installed in the top filing compartment of carts 9CA24 and 9CA25.

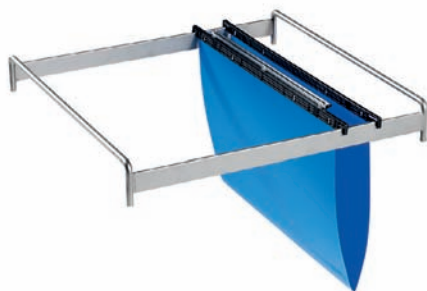

Cod. 9CA9232

SUPPORTO CARTELLE FORMATO A4 SPECIALE

Kit costituito da telaio di supporto rimovibile e n° 20 porta cartelle per documenti di formato A4 speciale.

Installabile su vano a pozzetto nei carrelli 9CA24 e 9CA25.


Installabile su vano cassettone nei carrelli 9CA25.

HANGER SUPPORT FOR SIZE A4 SPECIAL FOLDERS

Kit consisting of a removable frame and 20 folders suitable for size A4 special documents.

Can be installed in the top filing compartment of carts 9CA24 and 9CA25.

Can be installed in the filing drawer of carts 9CA25.

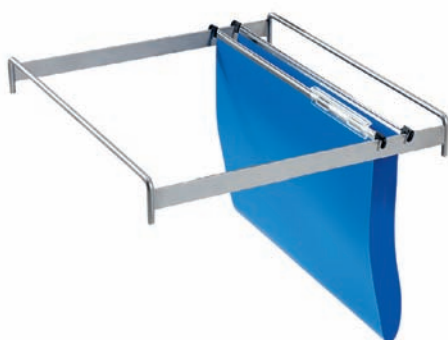

Cod. 9CA9230

SUPPORTO CARTELLE FORMATO A3

Kit costituito da telaio di supporto rimovibile e n° 20 porta cartelle per documenti di formato A3.

Installabile su vano a pozzetto nei carrelli 9CA24 e 9CA25.

HANGER SUPPORT FOR SIZE A3 FOLDERS

Kit consisting of a removable hanger support frame and 20 folders suitable for size A3 documents.

Can be installed in the top compartment of carts 9CA24 and 9CA25.




Cod. 9CA9230

GRUPPO CARTELLE A SOFFIETTO



Costituito da telaio di supporto e n° 20 porta cartelle a soffietto in telo elettrosaldato.

SUSPENSION LINK FILE UNIT



Consisting of a support frame and 20 heat-sealed suspension link files.

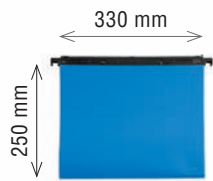



Cod. 9CA9236
Cartella formato A4
Folder size A4

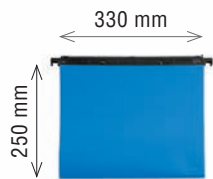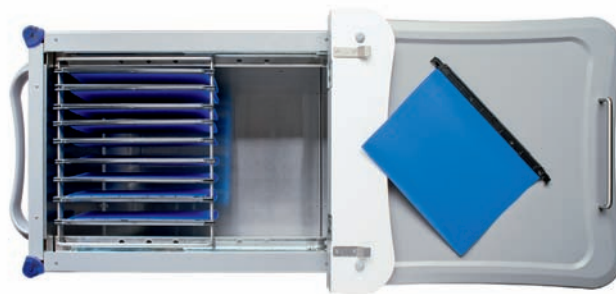



Cod. 9CA9236
Cartella formato A4
Folder size A4

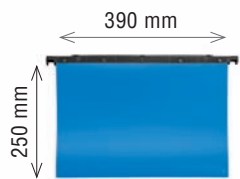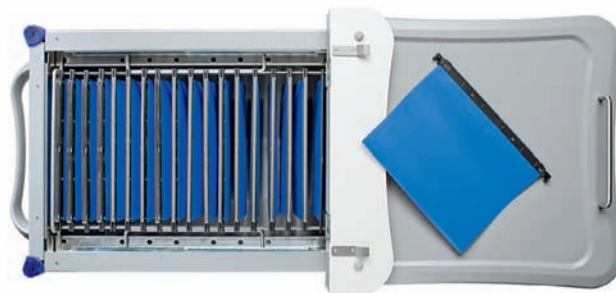


Cod. 9CA9237
Cartella formato A4 speciale
Folder size A4 special

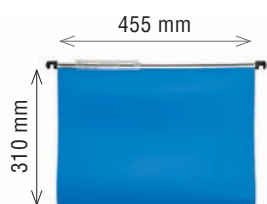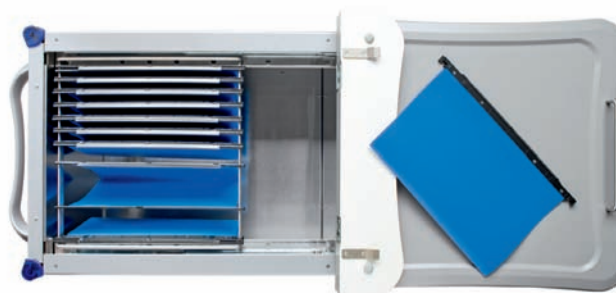

Cod. 9CA923
Cartella formato A3
Folder size A3

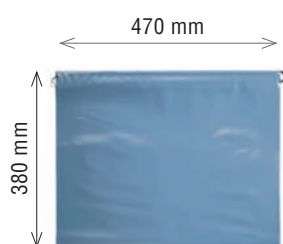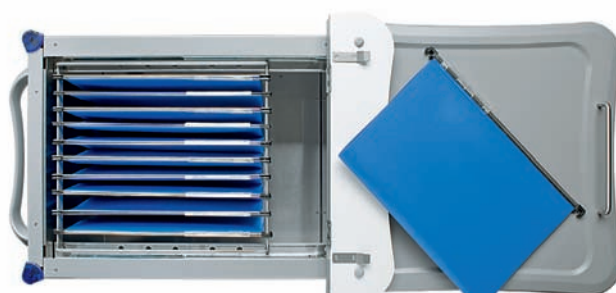

Cartella a soffietto
Suspension link file

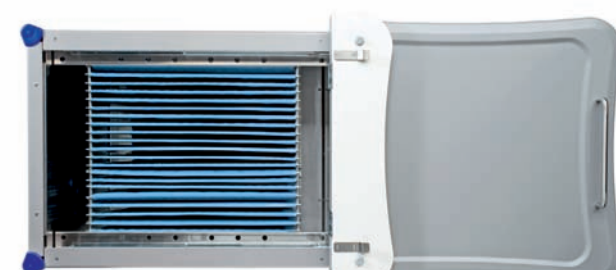

Cod. 9CA2601
Carrello 9CA2601
Cart 9CA2601

Cod. 9CA9212
Portarifiuti medio da 14 litri
Waste bin size 14 litre

Cod. 9CA9105
Tasca portacartelle laterale
Side chart / folder holder

Esempio di configurazione con accessori
Example of the configuration with accessories



La **linea 9CA26** è pensata per accogliere un PC e tutta la strumentazione correlata.

Line 9CA26 is designed to accommodate a PC and all related equipment.

Maniglia sagomata con impugnatura ergonomica, realizzata in pressofusione di alluminio verniciata a polveri epossidiche.

Contoured handle with an ergonomic grip made in die-cast aluminium with an epoxy coated finish.

Il cassetto è dotato di guide telescopiche che ne consentono un totale accesso. Il cassetto può essere rimosso.

The drawer is fitted with telescopic guides for total access and is also removable.



La schiena del carrello è composta da un pannello rimovibile in alluminio verniciato a polveri epossidiche.

The back of the cart consists of a removable aluminium panel with an epoxy coated finish.



Rimuovendo il pannello posteriore senza ausilio di utensili si eseguono comodamente tutti i cablaggi.


The rear panel can be removed without the use of tools, to aid the wiring up of the equipment.



Cod. 9CA9203

Passacavo in materiale plastico dotato di tappo di chiusura. Permette di collocare apparecchi alimentati sul top in MDF facendo passare i cavi che rimangono così sempre in ordine e all'interno della scocca del carrello.

A plastic cable tidy with cap allows electrical equipment to be neatly placed on the MDF top surface with all the cables passing directly through into the cart frame.

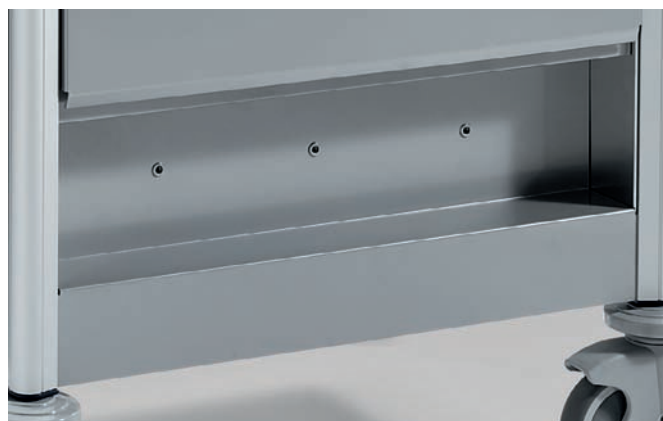

Vano incassato per poter alloggiare una multipresa.

Recessed compartment to accommodate a multi-plug extension lead.

- Nella parte centrale sono ricavati due vani, uno specifico per l'alloggiamento della Tower Case e un vano utilizzabile come vano a giorno.
- Il piano di appoggio della Tower Case è dotato di foratura per il passaggio di cavi.
- Struttura realizzata con profili in alluminio anodizzato e pannellature completamente in alluminio verniciato a polveri epossidiche.
- Ripiano e divisorio interni in nobilitato bordato ABS e lamiera di alluminio
- Top sagomato in MDF con bordi arrotondati
- Tutti i cassetti sono rimovibili e dotati di guide telescopiche per il totale accesso. La loro forma li rende facilmente lavabili e sanificabili.
- Ripiano portatastiera estraibile in MDF con bordi arrotondati.
- Maniglia sagomata di serie su lato sinistro con impugnatura ergonomica, realizzata in pressofusione di alluminio verniciata a polveri epossidiche.
- Barra di supporto accessori di serie su lato destro realizzata in tubo di acciaio Inox, lunghezza utilizzabile 37 cm.
- Posteriormente un pannello rimovibile permette un agevole cablaggio dei cavi, inoltre è presente un vano incassato per alloggiare una multipresa.
- Alla base 4 ruote carenate in materiale plastico, girevoli su perno, di diametro 125 mm, di cui 2 con freno (poste su lato anteriore) e 2 girevoli. Ogni ruota monta un paracolpo girevole, in materiale plastico morbido.

Dimensioni Carrelli: b 782 mm - p 597 mm - h 1126 mm
Altezza del piano di lavoro: 1126 mm



Cod. 9CA2600

Nella parte centrale sono ricavati due vani, uno specifico per l'alloggiamento della Tower Case e un vano utilizzabile come vano a giorno. Il piano di appoggio del Tower Case è dotato di foratura per il passaggio di cavi nel caso in cui si voglia collocare una stampante nel vano inferiore a giorno.

The mid-section is split into two compartments, one specifically for housing the PC Tower Case and the other useable as an open storage area. The base of the Tower Case compartment is provided with a hole for cables to pass through and permits the possible use of a printer positioned in the lower compartment.



Cod. 9CA2601

Nella parte centrale sono ricavati due vani, uno specifico per l'alloggiamento della Tower Case e un vano utilizzabile come vano a giorno. Il carrello è predisposto nella parte inferiore con 1 cassetto h 100 mm stampato in monoscocca con maniglia antitrauma integrata.

The mid-section is split into two compartments, one specifically for housing the PC Tower Case and the other useable as an open storage area. In the lower compartment the cart is configured with a 1 one-piece moulded drawer h 100 mm with integrated anti-trauma drawer handle.

- The mid-section of the frame is split into two compartments, one specifically for housing the PC Tower Case and the other useable as an open storage area.
- The base of the Tower Case compartment is provided with a hole for cables to pass through.
- Structure made in anodized aluminium supports and aluminium panelling with an epoxy coated finish.
- The internal shelf and divider are in veneer with an ABS border and in sheet aluminium
- Top consists of a shaped MDF section with rounded borders.
- All the drawers as standard, are fitted with telescopic guides for total access as well as a system for removal. The shape of the drawers facilitates easy cleaning and disinfection.
- Pull-out keyboard shelf in MDF with rounded edges.
- Standard contoured handle on the left hand side with an ergonomic grip made in die-cast aluminium with an epoxy coated finish.
- Standard tubular stainless steel accessory rail support on the right hand side, useable length 37 cm.
- Removable panel at the rear for easy wiring plus a recessed compartment to accommodate a multi-plug extension lead.
- The base is fitted with 4 plastic swivel castors, diameter 125 mm, 2 of which are provided with a brake (at the front). A soft plastic swivelling bumper is mounted above each castor.

Cart Dimensions: l 782 mm - b 597 mm - h 1126 mm
Worktop Height: 1126 mm



Cod. 9CA2602

Nella parte centrale sono ricavati due vani, uno specifico per l'alloggiamento della Tower Case e un vano con casellario a 6 posti di formato A3 con separatori in Plexiglas (dimensione singolo posto: b 59 mm, p 365 mm, h 464 mm). Il carrello è predisposto nella parte inferiore con 2 cassetti h 100 mm stampati in monoscocca con maniglia antitrauma integrata.

The mid-section is split into two compartments, one specifically for housing the PC Tower Case while the other is fitted with a filing section containing 6 compartments; size A3 with dividers in Plexiglas (single compartment size: l 59 mm, b 365 mm, h 464 mm). In the lower compartments the cart is configured with 2 one-piece moulded drawers h 100 mm with integrated anti-trauma drawer pull handles.



Cod. 9CA2603

Nella parte centrale sono ricavati due vani, uno specifico per l'alloggiamento della Tower Case e un vano con casellario a 6 posti di formato A3 con separatori in Plexiglas (dimensione singolo posto: b 59 mm, p 365 mm, h 464 mm). Il carrello è predisposto nella parte inferiore con 1 cassetto h 100 mm stampato in monoscocca con maniglia antitrauma integrata.

The mid-section is split into has two compartments, one specifically for housing the PC Tower Case while the other is fitted with a filing section containing 6 compartments; size A3 with dividers in Plexiglas (single compartment size: l 59 mm, b 365 mm, h 464 mm). In the lower compartment the cart is configured with 1 one-piece moulded drawer h 100 mm with integrated anti-trauma drawer pull handle.

Accessori lato destro carrello
Accessories for the right hand side of cart



Cod. 9CA9105
 Tasca portacartelle laterale.
 Non disponibile per 9CA23
Side chart/folder holder.
Not available for 9CA23



Cod. 9CA9211
 Barra di supporto porta accessori destra.
 Non disponibile per 9CA23
Right hand side accessory rail support.
Not available for 9CA23



Cod. 9CA9215
 Piano laterale reclinabile in MDF.
 Non disponibile per 9CA23- 9CA24 -9CA25
Fold-up MDF worktop.
Not available for 9CA23 - 9CA24 - 9CA25



Cod. 9CA9212
 Porta rifiuti medio da 14 litri.
 Non disponibile per 9CA23
Medium waste bin 14 litre.
Not available for 9CA23



Cod. 9CA9213
 Porta rifiuti grande da 20 litri.
 Non disponibile per 9CA23 - 9CA25
Large waste bin 20 litre.
Not available for 9CA23 - 9CA25



Cod. 9CA9214
 Coppia di portarifiuti da 8 litri.
 Non disponibile per 9CA23
Pair of 8 litre waste bins.
Not available for 9CA23

Accessori lato sinistro carrello
Accessories for the left hand side of cart



Cod. 9CA9105
 Tasca portacartelle laterale.
 Non disponibile per 9CA23
Side chart/folder holder.
Not available for 9CA23



Cod. 9CA9220
 Barra di supporto porta accessori sinistra.
 Non disponibile per 9CA23
Left hand side accessory rail support.
Not available for 9CA23



Cod. 9CA9200

Ripiano in HPL, dimensioni: mm 600 x 425 x 10 h
 Non disponibile per 9CA21- 9CA25 -9CA26

HPL shelf, dimensions: 600 x 425 x 10 h mm
Not available for 9CA21- 9CA25 - 9CA26

Cod. VP5

Vassoio stampato dimensioni
 compatibili con ISO 3394.
 Dimensioni mm 600 x 400 x 50 h

Cod. VP5D

Vassoio stampato dimensioni
 compatibili con ISO 3394
 completo di divisori.
 Dimensioni mm 600 x 400 x 50 h

Non installabile nei carrelli:
 9CA21 - 9CA25



Cod. VP5

*Moulded tray, dimensions
 compatible with ISO 3394.
 Dimensions 600 x 400 x 50 h mm*

Cod. VP5D

*Moulded tray, dimensions compatible
 with ISO 3394 complete with dividers.
 Dimensions 600 x 400 x 50 h mm*

*Cannot be installed on carts:
 9CA21 - 9CA25*

Cod. VP10

Vassoio stampato dimensioni
 compatibili con ISO 3394.
 Dimensioni mm 600 x 400 x 100 h

Cod. VP10D

Vassoio stampato dimensioni
 compatibili con ISO 3394
 completo di divisori.
 Dimensioni mm 600 x 400 x 100 h

Non installabile nei carrelli:
 9CA21 - 9CA25



Cod. VP10

*Moulded tray, dimensions
 compatible with ISO 3394.
 Dimensions 600 x 400 x 100 h mm*

Cod. VP10D

*Moulded tray, dimensions compatible
 with ISO 3394 complete with dividers.
 Dimensions 600 x 400 x 100 h mm*

*Cannot be installed on carts:
 9CA21 - 9CA25*

Cod. VP20

Vassoio stampato dimensioni
 compatibili con ISO 3394.
 Dimensioni mm 600 x 400 x 200 h

Cod. VP10D

Vassoio stampato dimensioni
 compatibili con ISO 3394
 completo di divisori.
 Dimensioni mm 600 x 400 x 200 h

Non installabile nei carrelli:
 9CA21 - 9CA25 - 9CA26



Cod. VP20


*Moulded tray, dimensions
 compatible with ISO 3394.
 Size 600 x 400 x h 200 mm*

Cod. VP20D


*Moulded tray, dimensions compatible
 with ISO 3394 complete with dividers.
 Dimensions 600 x 400 x h 200 mm*

*Cannot be installed on carts:
 9CA21 - 9CA25 - 9CA26*


Linea 9CA21 - Line 9CA21

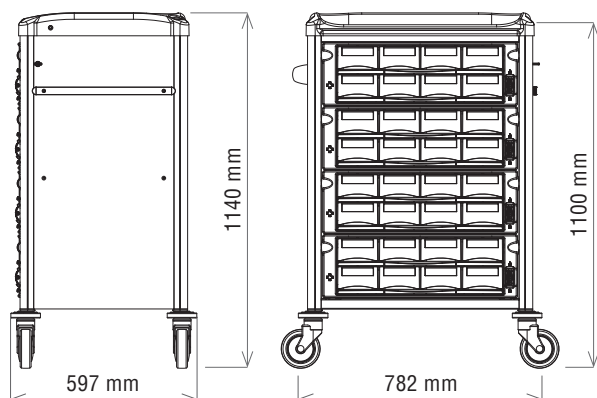


9CA2100

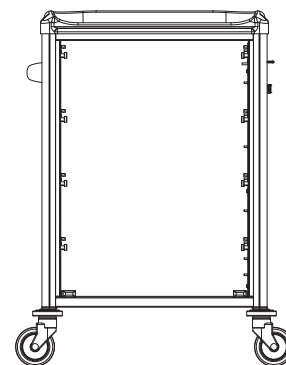


Linea 9CA22 - Line 9CA22

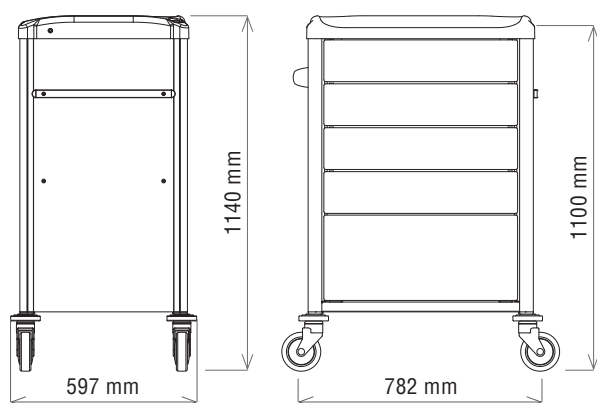


9CA2200

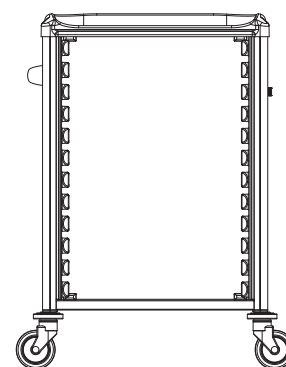


Linea 9CA23 - Line 9CA23

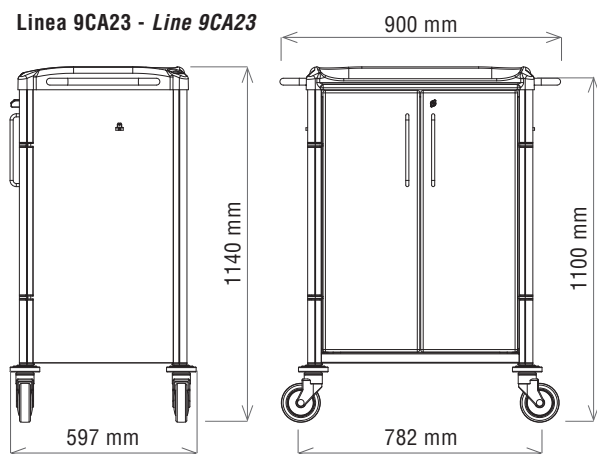


9CA2300

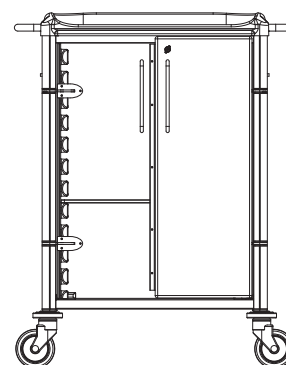


Linea 9CA24 - Line 9CA24

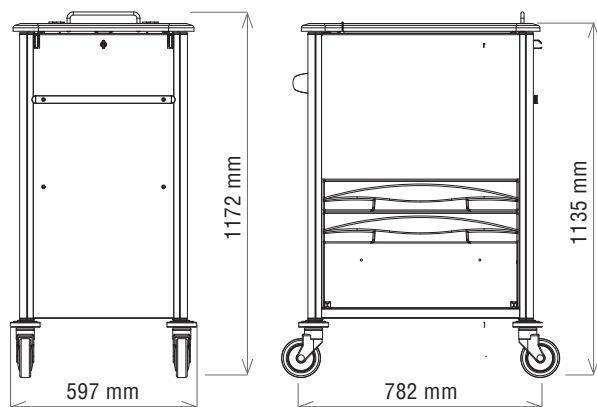


9CA2400

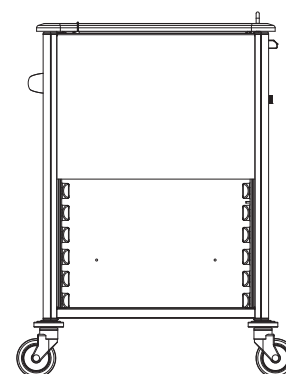


9CA2101

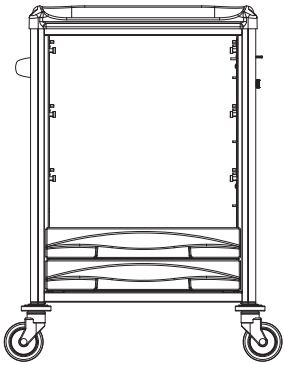


9CA2102

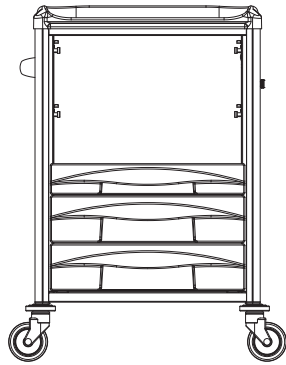


9CA2103

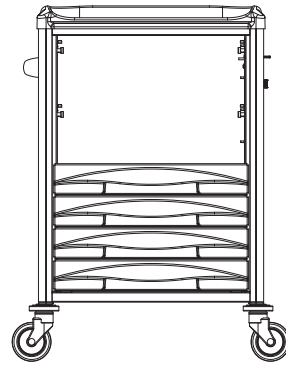


9CA2201

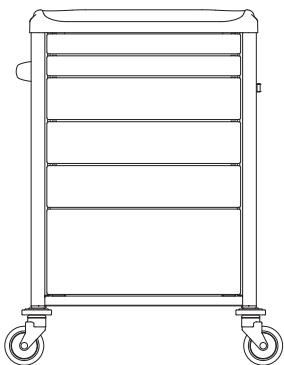


9CA2202

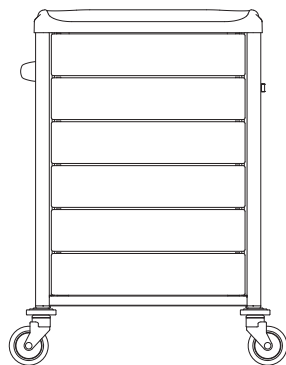


9CA2203

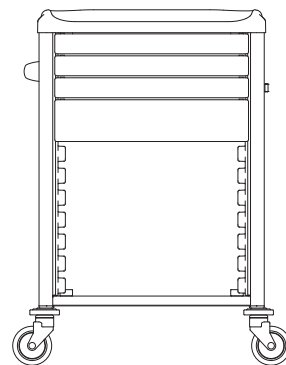


9CA2301

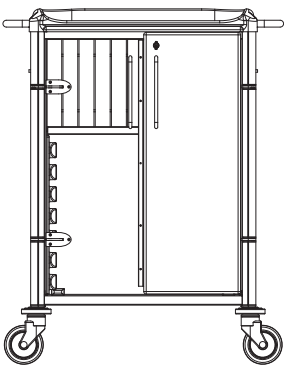


9CA2302

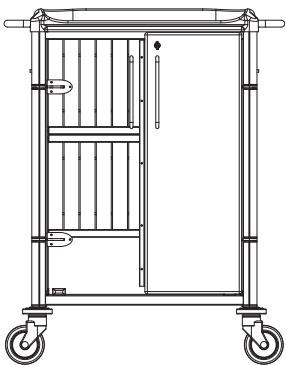


9CA2303

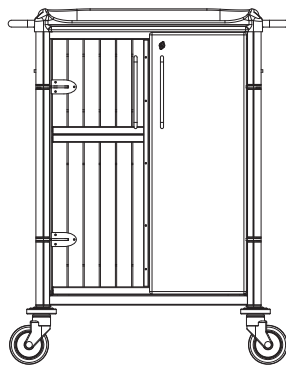


9CA2304

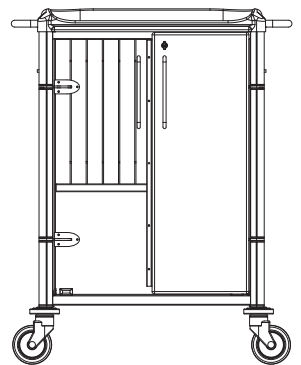

9CA2401

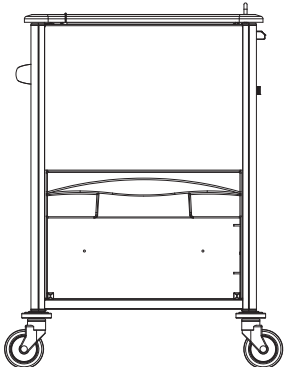


9CA2402

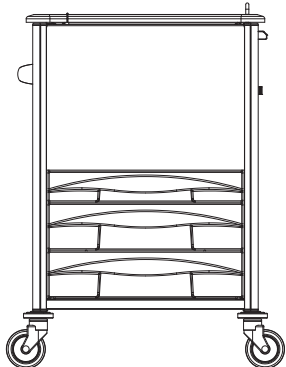


Scheda tecnica
Data sheet


Linea 9CA25 - Line 9CA25

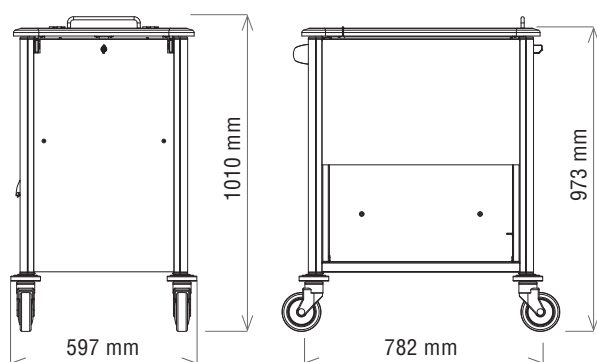


9CA2500

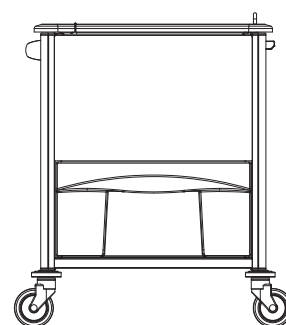

Linea 9CA26 - Line 9CA26

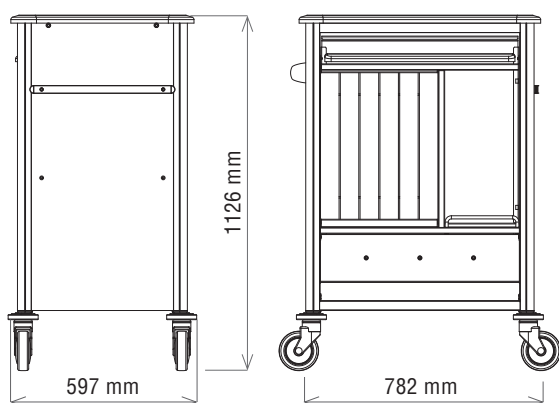

9CA2600

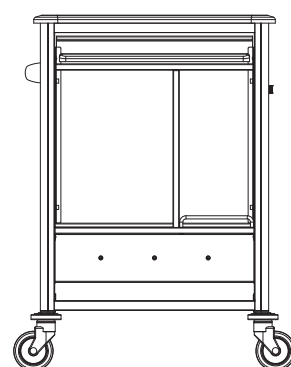

Colori antine
Door colours



Bianco - White




Acquamarina - Aquamarine




Verde - Green


9CA2601

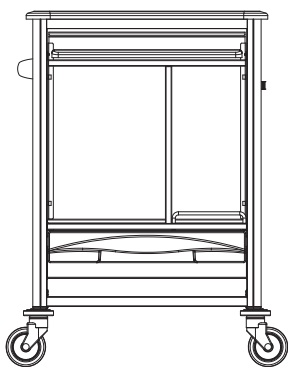

9CA2602

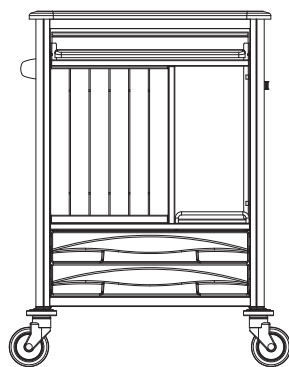

9CA2603

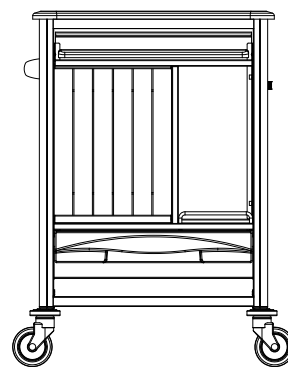

Colori cassette
Drawer colours



Celeste - Sky blue



Arancio - Orange



Rosso - Red



Mandarino - Mandarin orange



Avorio - Ivory



Bordeaux - Bordeaux red

Favero Health Projects Spa
Via Schiavonesca Priula, 20
31044 Biadene di Montebelluna
Trevise-Italy

Tel +39 0423 6125
Fax +39 0423 612680
E-mail: info@favero.it
www.favero.it

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2000
Azienda certificata UNI EN ISO 13485:2003

Ufficio Commerciale
Fax +39 0423 303433
uff.commerciale@favero.it

Ufficio Amministrativo
Fax +39 0423 612650
uff.amministrazione@favero.it

Ufficio Acquisti
Fax +39 0423 612646
uff.acquisti@favero.it

Export Dpt.
Fax +39 0423 600417
export.dpt@favero.it

0. Sistema Modulare Zerofire
Sistema Modulare Zerofire
6. Degenza 3002
General hospital bed 3002
7. Letti a colonna
Column-mounted beds
8. Accessori Ortopedia
Orthopaedic accessories
9. Accessori letti
Bed accessories
10. Comodini - Tavoli servitori
Bedside cabinets - Overbed tables
11. Letti ad altezza variabile Wing
Adjustable height beds Wing
12. Letti a colonna Entasis
Column-mounted beds Entasis
14. Comodini Tender
Bedside cabinets Tender
17. Banconi
Reception desks
20. Praxis
Praxis
21. Armadi degenza
Patient lockers
22. Armadi porta medicinali
Medicine Cabinets

23. Armadi vetrina
Glass-fronted cupboards
26. Cucinette piano
Floor kitchenettes
41. Poltrone relax
Relax armchairs
42. Poltrone prelievi
Specimen-collection chairs
43. Sedute ufficio
Office seating
50. Ambulatori
Consulting rooms
51. Lettini visita H.V.
Ht. Adj. Examination tables
52. Letto rianimazione con pesatura
ICU bed with weighing device
53. Accessori sale operatorie
Operating theatre accessories
54. Barelle
Stretcher trolleys
55. Letto rianimazione pediatrica
Paediatric intensive care bed
56. Letto rianimazione elettrico
Electrically operated intensive care bed
57. Letto rianimazione
Intensive care bed

58. Barelle rianimazione
Resuscitation stretcher trolley
59. Barella emergenza
Emergency stretcher trolley
60. Carrelli
Carts and Trolleys
61. Carrelli Baydur
Baydur carts
64. CarLo Carrelli Logistica
CarLo Logistics carts
- 68. CartEsio Carrelli**
CartEsio Carts
70. Over-tour carrello monoscocca
multifunzione
Over-tour multi-purpose cart
72. Fasciatoi - Culle e lettini
Nappy changing units - Cradles and cots
73. Fasciatoio
Nappy changing units
81. Uffici
Offices
83. Cartella colori
Colour chart