

Fasciatoi - Culle e lettini
Nappy changing units - Cradles and cots





Letto pediatria manuale a due sezioni, con possibilità di variazione dell'inclinazione dello schienale, movimenti di Trendelenburg e contro Trendelenburg e variazione dell'altezza del piano rete.

Piano rete realizzato con cover in ABS rimovibili e sponde con struttura in acciaio verniciato e pannelli in plexiglas trasparente antiurto.

Dimensioni piano rete: 1300 x 650 mm

Manual two-section paediatric bed with variable mattress height and adjustable backrest providing Trendelenburg and reverse Trendelenburg tilt.

*The removable mattress platform sections are cased in ABS, the siderails are made from painted steel and the panels are made from shatterproof plexiglas. **Mattress size:** 1300 x 650 mm*



Lo schienale può essere regolato mediante movimento manuale servoassistito.
Manual servo-assisted backrest adjustment.



L'altezza del piano rete può essere variata su più posizioni per raggiungere la posizione più idonea per il bambino o per l'operatore.
The mattress platform is fully height adjustable allowing it to be set to the ideal position for the child and carer.

Le sponde in plexiglas trasparente abbinata ai pannelli trasparenti posti al lato testa e al lato piedi permettono un'ottima visibilità sul bambino. L'altezza può essere regolata su tre posizioni.

The transparent plexiglas siderails and transparent panels at the head and foot of the paediatric bed provide optimum visibility of the child at all times. Siderail height can be set to three positions.



Il sistema di blocco e sblocco delle sponde è molto semplice e al tempo stesso sicuro e non consente sblocchi accidentali.

The siderail locking mechanism is simple and secure and is designed to prevent accidental unlocking.



Ai quattro angoli del lettino sono presenti paracolpi morbidi che proteggono dagli urti laterali durante gli spostamenti.

Each corner of the paediatric bed has a soft impact-resistant bumper providing protection from damage during movement.



Il basamento è dotato di quattro ruote gemellari girevoli, di diametro 125 mm, tutte dotate di freno singolo.

The base is equipped with four 125 mm twin-wheel swivel castors each equipped with brake.



Il meccanismo per regolare l'altezza del piano rete è manuale e dotato di alcune posizioni predeterminate. Il meccanismo è presente sia al lato testa che al lato piedi e permette di realizzare anche le posizioni di Trendelenburg e contro Trendelenburg.

The manual height adjustment system for the mattress platform provides a range of pre-set positions. The height can be adjusted at both the head and foot of the paediatric bed for Trendelenburg and reverse Trendelenburg tilt.

Il piano rete raggiunge le posizioni di Trendelenburg e contro Trendelenburg.

The mattress platform can be set to Trendelenburg and reverse Trendelenburg tilt.



Una leva di sblocco posta in prossimità dello schienale permette di inclinare lo schienale sino all'angolo desiderato.

The conveniently located lever allows inclination to be locked at the desired level.



Coperture del piano rete realizzate in ABS termoformato, asportabili per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione. (Solo su modelli 9LP0022, 9LP0023 e 9LP0040)

The ABS mattress platform sections can easily be removed to facilitate cleaning and disinfection. (for 9LP0022, 9LP0023 & 9LP0040 models only)



Letto pediatria manuale a due sezioni, con possibilità di variazione dell'inclinazione dello schienale, movimenti di Trendelenburg e contro Trendelenburg e variazione dell'altezza del piano rete. Piano rete realizzato con cover in ABS rimovibili e sponde a listelli.
Dimensioni piano rete: 1300 x 650 mm

*Manual two-section paediatric bed with variable mattress height and adjustable backrest providing Trendelenburg and reverse Trendelenburg tilt. The paediatric bed has removable ABS covered mattress platform sections and sliding siderails. **Mattress size:** 1300 x 650 mm*



Movimentazioni **Movements**

L'altezza del piano rete può essere variata su più posizioni per raggiungere la posizione più idonea per il bambino o per l'operatore.

The mattress platform is fully height adjustable allowing it to be set to the ideal position for the child and carer.



Il sistema di blocco e sblocco delle sponde è molto semplice e al tempo stesso sicuro e non consente sblocchi accidentali.

The siderail locking mechanism is simple and secure and is designed to prevent accidental unlocking.



Una leva di sblocco posta in prossimità dello schienale permette di inclinare lo schienale sino all'angolo desiderato.

The conveniently located lever allows inclination to be locked at the desired level.



Il basamento è dotato di quattro ruote gemellari girevoli, di diametro 125 mm, tutte dotate di freno singolo.

The base is equipped with four 125 mm twin-wheel swivel castors each equipped with brake.

Cod. 9LP0022
Lettino Pediatria manuale
Manual Paediatric bed

L'altezza delle sponde può essere regolata su tre posizioni fino ad un'altezza massima di circa 62 cm dal piano rete.
The siderails can be adjusted to three pre-set levels with a maximum height of 62 cm above the mattress platform.



Le sponde e il maniglione di spinta sono sagomati per ottenere un elevato contenimento.
Il pannello in plastica antiurto trasparente consente la massima visibilità all'interno del lettino.
I quattro montanti realizzati in plastica riciclabile, accolgono le guide per lo scorrimento delle sponde e per l'inserimento dei pannelli in plexiglas trasparente e del maniglione di spinta.

The siderails and handle are designed to keep the child securely inside the paediatric bed while the shatterproof transparent plastic panel provides excellent visibility. The sliding siderails, handle and plexiglas panels are all housed within four fully recyclable plastic supports.



Il piano rete raggiunge le posizioni di Trendelenburg e contro Trendelenburg.
The mattress platform can be set to Trendelenburg and reverse Trendelenburg tilt.

Il meccanismo per regolare l'altezza del piano rete è manuale e dotato di alcune posizioni predeterminate. Il meccanismo è presente sia al lato testa che al lato piedi e permette di realizzare anche le posizioni di Trendelenburg e contro Trendelenburg.
The manual height adjustment system for the mattress platform provides a range of pre-set positions. The height can be adjusted at both the head and foot of the bed for Trendelenburg and reverse Trendelenburg tilt.




Lettimi / Beds	9LP0020	9LP0022	9LP0023	9LP0040
Piano rete articolato in due sezioni <i>Bed support articulation in two sections</i>	In tondino, fisso <i>Grill frame, fixed</i>	In materiale plastico, asportabile <i>Plastic frame, removable</i>		
Dimensioni piano rete / <i>Bed support surface dimensions</i>	650x1300 mm	650x1300 mm	700x1640 mm	650x1300 mm
Dimensioni schienale (con ferma materasso) <i>Back section dimensions (with mattress)</i>	650x600 mm	650x600 mm	610x675 mm	650x600 mm
Dimensioni gambale / <i>Leg section dimensions</i>	650x690 mm	650x690 mm	700x910 mm	650x690 mm
Dimensioni d'ingombro / <i>Overall dimensions</i>	800x1635x1270 mm	800x1635x1270 mm	850x1960x1330 mm	800x1635x1210 mm
Altezza da terra piano rete <i>Bed support surface height from ground</i>	650 / 900 mm	650 / 900 mm	710 / 960 mm	650 / 900 mm
Altezza sponde dal piano rete <i>Side rail height from bed support surface</i>	620 mm	620 mm	620 mm	550 mm
Altezza sponde da terra / <i>Side rail height from ground</i>	890 / 1330 mm	890 / 1330 mm	890 / 1330 mm	740 / 1270 mm
Peso del letto (senza accessori) <i>Bed weight (without accessories)</i>	70 Kg	70 Kg	80 Kg	75 Kg
Carico di lavoro sicuro / <i>Safe work load</i>	70 Kg	70 Kg	70 Kg	70 Kg
Ruote <i>Wheel</i>	Piroettanti gemellari con freno singolo indipendente, diametro 125 mm <i>Swivel twin wheel with single brake, diameter 125 mm</i>			
Inclinazione schienale / <i>Back section inclination</i>	0° - 74°	0° - 74°	0° - 70°	0° - 74°
Trendelenburg e contro Trendelenburg <i>Trendelenburg and reverse Trendelenburg</i>	±12°	±12°	±12°	±12°

Accessori / Accessories	9LP0020	9LP0022	9LP0023	9LP0040
Materasso / <i>Mattress</i>	9LP9001	9LP9001	9LP9003	9LP9001
Cestello porta indumenti / <i>Garment container</i>	9LP9009	9LP9009	-	9LP9009
Morsetto asta flebo / <i>IV pole port</i>	9LP9021	9LP9021	9LP9021	9LP9021
Asta flebo 2 ganci plastica / <i>IV pole with 2 plastic hooks</i>	9LP9022	9LP9022	9LP9022	9LP9022



Letto pediatria con uno snodo, due sezioni e allungaletto.
La sezione schienale è movimentata con attuatore elettrico.
La copertura dello schienale è asportabile ed è realizzata in ABS termoformato, con fori di aerazione dello schienale.
La sezione fissa è realizzata con pannello in HPL, spessore 6 mm, con fori di aerazione per il materasso.
La sezione dell'allungaletto è movimentata con un attuatore elettrico che permette un allungamento di 30 cm.
Altezza variabile, Trendelenburg e Contro Trendelenburg sono realizzati mediante colonne telescopiche elettriche.
Il letto ha di serie delle sponde a listelli, regolabili manualmente in altezza, che si allungano in automatico quando si estrae l'allungaletto.
Il letto monta di serie anche le spalle in plexiglas trasparente antiurto.
Dimensioni piano rete: lunghezza variabile da circa 1600 a 1900 mm.

Two section cot with bed extension.
The backrest is operated by an electric actuator. The backrest cover is removable, made in thermoformed ABS with holes for aeration.
The fixed section is made from HPL 6 mm thick with aeration holes for the mattress.
The bed extension section is operated by an electric actuator which allows an extension up to 30 cm.
The bed height adjustment, Trendelenburg and reverse Trendelenburg movements are activated electrically by means of the electric telescopic columns. The bed has as standard side rail panels manually adjustable in height which extends automatically as the bed extension is extracted.
Also as standard are bed boards in plexiglas transparent and shockproof.
Bed support dimensions:
adjustable lengths; between approximately 1600-1900 mm.

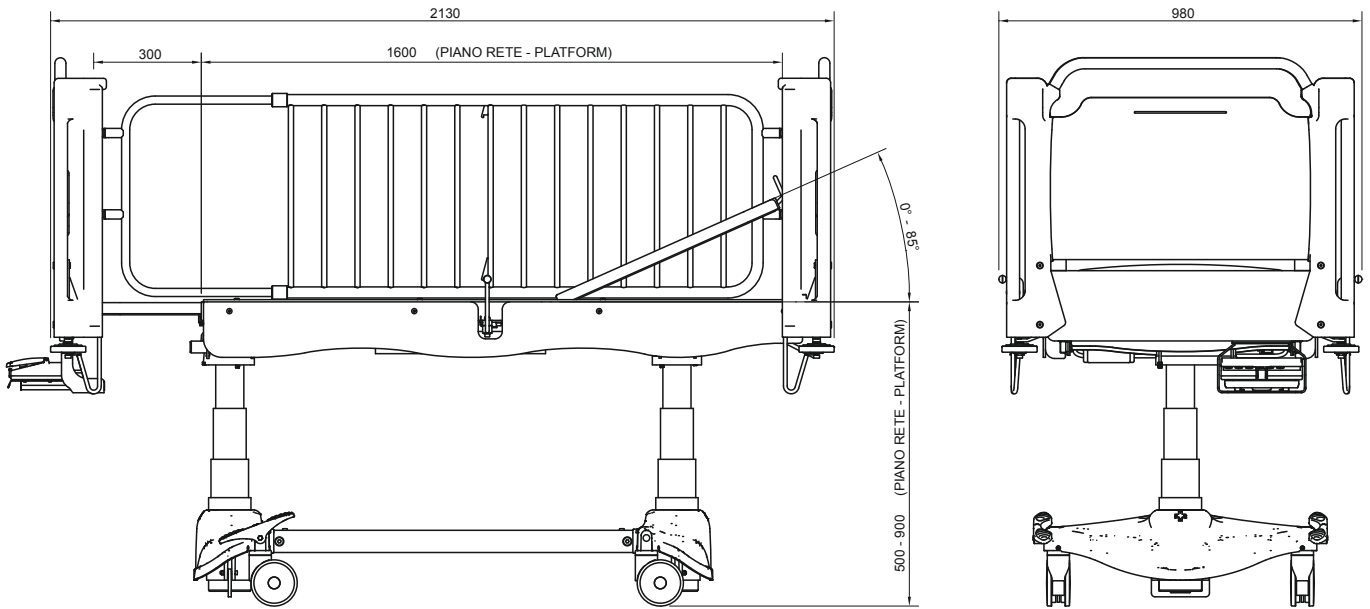



Carrello realizzato con struttura in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche dotato di quattro ruote gemellari, girevoli con freno singolo, d. 75 mm. Culla stampata con materiale plastico trasparente antiurto, dotata di fori di aerazione.
Materassino imbottito rivestito in materiale plastico lavabile.

Epoxy coated tubular steel trolley fitted with four 75 mm twin-wheel single-brake castors.
Cradle made from transparent shatterproof plastic with ventilation holes.
Padded mattress covered with a washable plastic fabric.



Possibilità di inclinazione della culla di circa 10°.
The cradle can be inclined up to 10°.



Esempio di composizione
Example set up



Cod. 9CU9002
Cupoletta per trasporto culla, stampata in materiale plastico trasparente antiurto, dotata di fori di aerazione.
The cradle dome, used during transport, is made of transparent shatterproof plastic with ventilation holes.



Cod. 9CU9000
Materassino imbottito rivestito in materiale plastico lavabile.
Padded mattress covered with a washable plastic fabric.



Cod. 9CU9003
Culla stampata con materiale plastico trasparente antiurto, dotata di fori di aerazione.
Cradle made from transparent shatterproof plastic with ventilation holes.



Cod. 9CU9005
Cassoncino per culla realizzato in lamiera di acciaio verniciato con frontale in HPL. Contenitore asportabile interno in materiale plastico.
Epoxy coated steel unit with laminated plastic front and removable plastic inner container.


Cod. 9CU0015
Culla ad altezza variabile
Height adjustable cradle



Culla ad altezza variabile con carrello e materasso.

Carrello porta culla realizzato in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche con anello di contenimento superiore. Possibilità di inclinazione della culla. Sistema di sollevamento con pompa a gas.

Basamento in acciaio cromato con quattro ruote piroettanti dotate di freno ed aventi diametro 75 mm, con forma a doppia "C" per un facile inserimento anche sotto il letto. Culla in materiale plastico trasparente antiurto dotata di fori per aerazione.

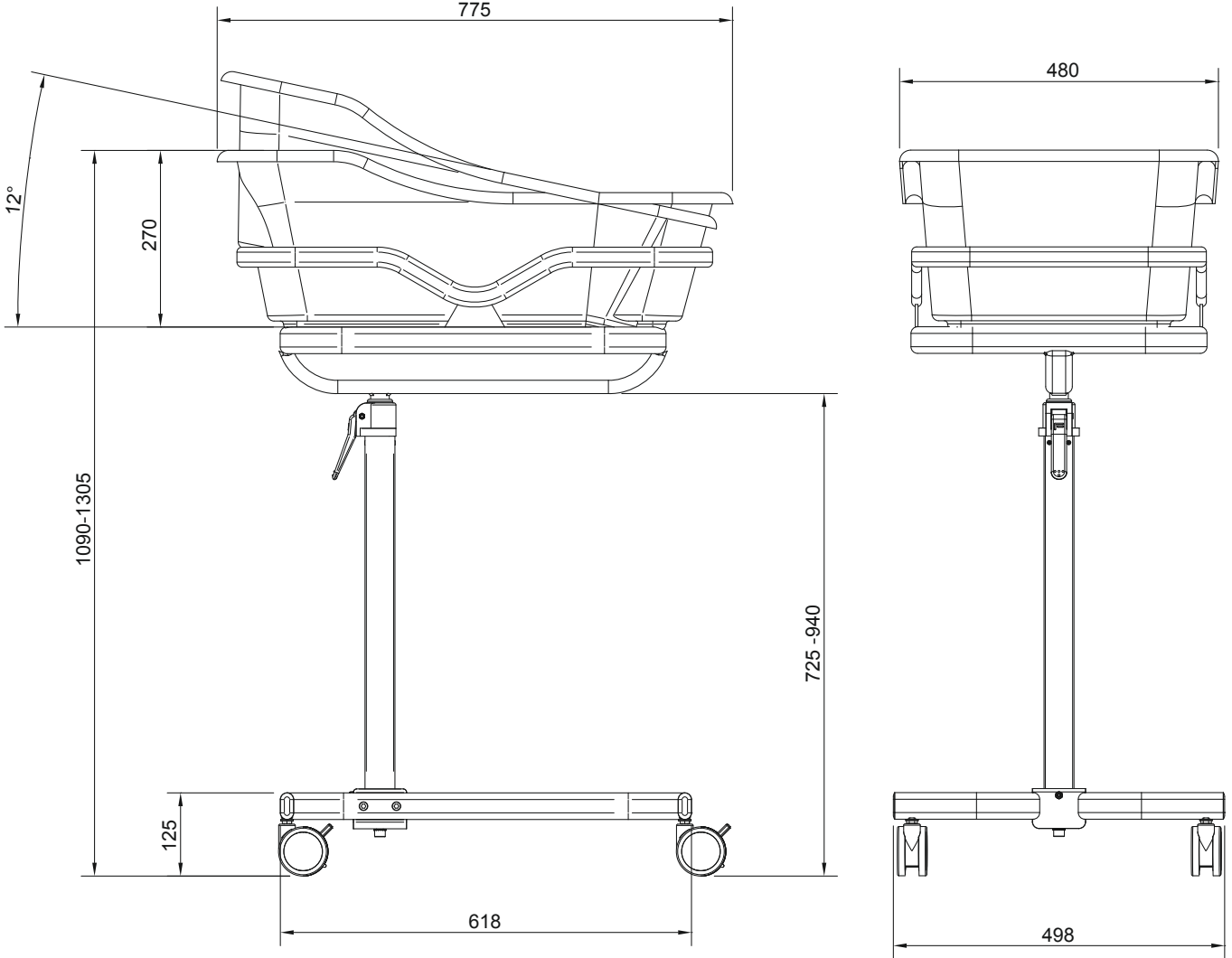

Height adjustable cradle with trolley and mattress.

The trolley consists of an epoxy coated tubular steel frame with an upper cradle containment ring. The cradle in plastic may be inclined. The double "C" shape base is fitted with four swivel twin castors, d. 75 mm with a single brake.

Variable height adjustment attained utilizing a gas spring. Cradle made from a moulded transparent unbreakable plastic, fitted with ventilation holes. Padded mattress coated with a washable plastic cover.

Il Fasciatoio Praxis si presenta come prodotto molto versatile che si adatta alle diverse esigenze del cliente.

Il fasciatoio può essere fornito come semplice piano fasciatoio per cambiare il neonato, ma anche con un sofisticato sistema di controllo che gestisce i dati del neonato, quali temperatura corporea, altezza, peso e codice identificativo, e controlla il riscaldamento del materassino.

Nella versione più completa, al sistema di controllo può essere abbinata anche una bilancia integrata all'interno del piano del fasciatoio.

The versatile Praxis changing table adapts to suit every need.

It can be supplied as a simple infant changing platform or with a temperature controlled mattress and sophisticated control system which supplies data on body temperature, length, weight and identification code.

A fully-equipped model with built-in weighing scales is also available.



Pannello di controllo
Control panel

Materassino
Changing pad

Bagnetto
Bath

Piano fasciatoio
Changing table platform

Composizione Praxis
Units from the Praxis range



La versione completa del fasciatoio prevede una bilancia pesa neonati inserita all'interno del piano fasciatoio.
La bilancia permette di pesare il bambino e inserire questo dato in automatico all'interno della memoria del sistema di controllo.
Una lampada e un comodo portabottiglie completano l'allestimento del fasciatoio.
Portata bilancia: 15 kg

*The fully-equipped version of the changing table comes with weighing scales built into the platform under the changing pad.
The scales automatically input the weight of the infant into the system memory for future access and comparison.
To complete the changing table, a lamp and bottle holder are also available.
Maximum Weight Capacity: 15 kg*


Il sofisticato sistema di controllo del fasciatoio permette di gestire in modo semplice molte funzioni. Sul pannello di controllo si trovano una pratica tastiera per accedere alle funzioni e implementare dati, un ampio display per la visualizzazione, e uno sportellino all'interno del quale trovano comodo alloggiamento i fusibili e una presa RJ-45 per poter accedere ai dati conservati all'interno della memoria del sistema di controllo.

Una voce femminile aiuta l'utente nell'utilizzo del pannello di controllo.
Musiche personalizzabili allietano l'utente e il neonato durante l'utilizzo del fasciatoio.
Il sistema di controllo permette di tenere anche sotto controllo eventuali guasti rendendo sicuro l'utilizzo del dispositivo.




*The sophisticated control system provides easy access to a range of functions.
The control panel is equipped with a touch pad for operation and data input, a large display and a compartment containing the fuse box as well as a RJ-45 port for accessing the data stored in the control system.*


*A soothing female voice guides the user through the commands and a customizable selection of tunes provides entertainment for the infant and carer.
The control system is also designed to alert staff to any malfunction, giving total security and peace of mind.*

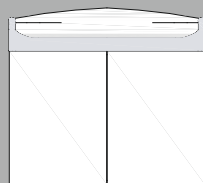


cod. FA 90
Piano fasciatoio
da 90 cm.
*Infant changing platform
90 cm.*

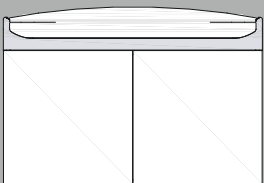


cod. FA 120
Piano fasciatoio
da 120 cm.
*Infant changing platform
120 cm.*

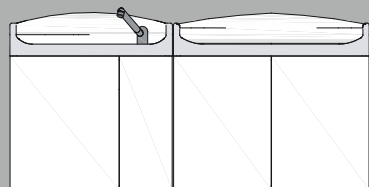


cod. FA 90 BS
Piano fasciatoio
da 90 cm
con bagnetto a sinistra.
*Infant changing platform
90 cm, left basin.*

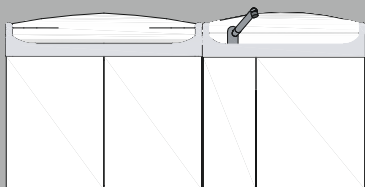


cod. FA 90 BD
Piano fasciatoio
da 90 cm
con bagnetto a destra.
*Infant changing platform
90 cm, right basin.*

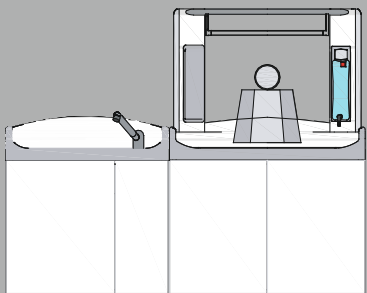


cod. FA 90 BS L B
Piano fasciatoio
da 90 cm
con bagnetto a sinistra ed
elemento riscaldante con
lampada e bilancia.
*Infant changing platform
90 cm, left basin,
temperature controlled
mattress, lamp, built-in
weighing scales.*

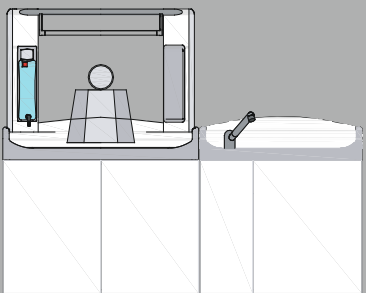


cod. FA 90 BD L B
Piano fasciatoio
da 90 cm
con bagnetto a destra ed
elemento riscaldante con
lampada e bilancia.
*Infant changing platform
90 cm, right basin,
temperature controlled
mattress, lamp, built-in
weighing scales.*

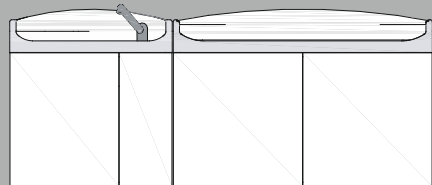


cod. FA 120 BS
Piano fasciatoio
da 120 cm
con bagnetto a sinistra.
*Infant changing platform
120 cm, left basin.*

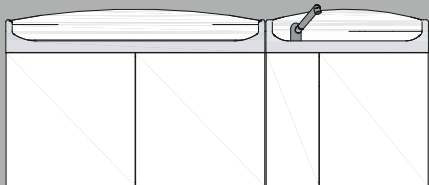


cod. FA 120 BD
Piano fasciatoio
da 120 cm
con bagnetto a destra.
*Infant changing platform
120 cm, right basin.*

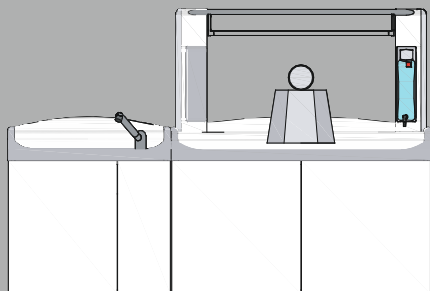


cod. FA 120 BS L B
Piano fasciatoio
da 120 cm
con bagnetto a sinistra ed
elemento riscaldante con
lampada e bilancia.
*Infant changing platform
120 cm, left basin,
temperature controlled
mattress, lamp, built-in
weighing scales.*

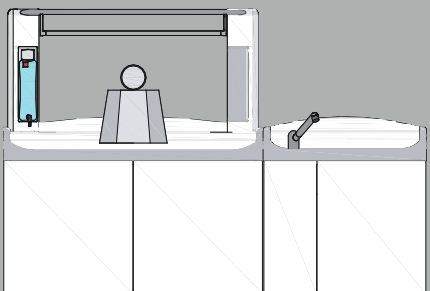


cod. FA 120 BD L B
Piano fasciatoio
da 120 cm
con bagnetto a destra ed
elemento riscaldante con
lampada e bilancia.
*Infant changing platform
120 cm, right basin,
temperature controlled
mattress, lamp, built-in
weighing scales.*

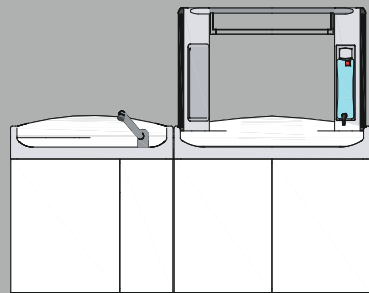


cod. FA 90 BS L
Piano fasciatoio
da 90 cm
con bagnetto a sinistra ed
elemento riscaldante con
lampada.
*Infant changing platform
90 cm, left basin,
temperature controlled
mattress, lamp.*

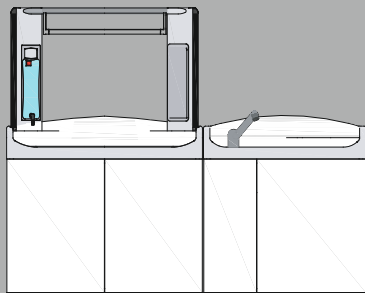


cod. FA 90 BD L
Piano fasciatoio
da 90 cm
con bagnetto a destra ed
elemento riscaldante con
lampada.
*Infant changing platform
90 cm, right basin,
temperature controlled
mattress, lamp.*

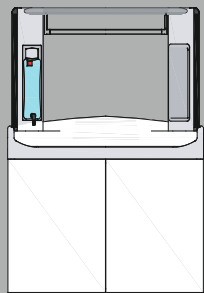


cod. FA 90 L
Piano fasciatoio
da 90 cm con elemento
riscaldante e lampada.
*Infant changing platform
90 cm, temperature
controlled mattress, lamp.*

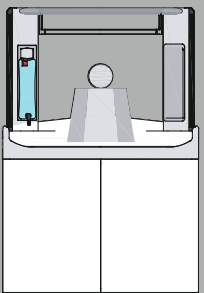


cod. FA 90 L B
Piano fasciatoio
da 90 cm con elemento
riscaldante, lampada
e bilancia.
*Infant changing platform
90 cm, temperature
controlled mattress, lamp,
built-in weighing scales.*

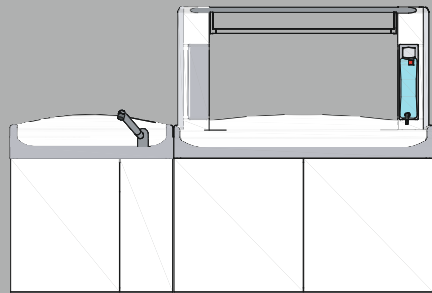


cod. FA 120 BS L
Piano fasciatoio
da 120 cm
con bagnetto a sinistra ed
elemento riscaldante con
lampada.
*Infant changing platform
120 cm, left basin,
temperature controlled
mattress, lamp.*

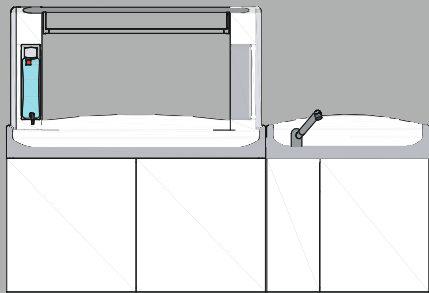


cod. FA 120 BD L
Piano fasciatoio
da 120 cm
con bagnetto a destra ed
elemento riscaldante con
lampada.
*Infant changing platform
120 cm, right basin,
temperature controlled
mattress, lamp.*

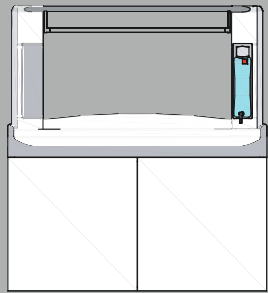


cod. FA 120 L
Piano fasciatoio
da 120 cm
con elemento riscaldante e
lampada.
*Infant changing platform
120 cm, temperature
controlled mattress, lamp.*

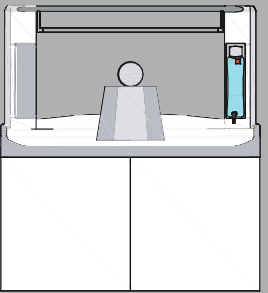


cod. FA 120 L B
Piano fasciatoio
da 120 cm con elemento
riscaldante, lampada
e bilancia.
*Infant changing platform
120 cm, temperature
controlled mattress, lamp,
built-in weighing scales.*

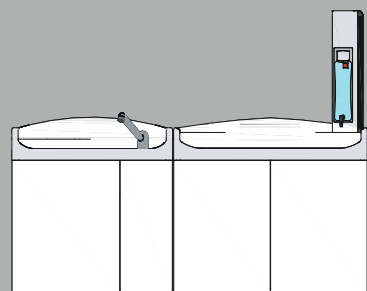


cod. FA 90 BS L1
Piano fasciatoio
da 90 cm
con bagnetto a sinistra ed
elemento riscaldante.
*Infant changing platform
90 cm, left basin,
temperature controlled
mattress.*

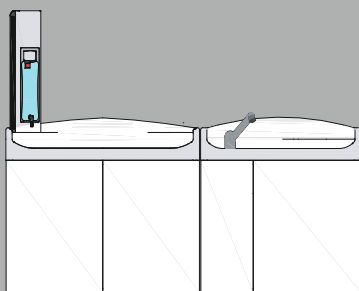


cod. FA 90 BD L1
Piano fasciatoio
da 90 cm
con bagnetto a destra ed
elemento riscaldante.
*Infant changing platform
90 cm, right basin,
temperature controlled
mattress.*

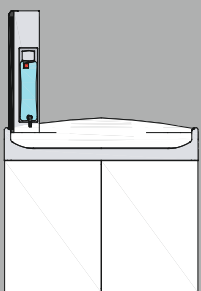


cod. FA 90 L1
Piano fasciatoio
da 90 cm con elemento
riscaldante.
*Infant changing platform
90 cm, temperature
controlled mattress.*

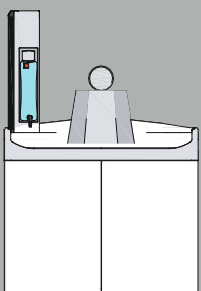


cod. FA 90 L1 B
Piano fasciatoio
da 90 cm con elemento
riscaldante e bilancia.
*Infant changing platform
90 cm, temperature
controlled mattress, built-in
weighing scales.*

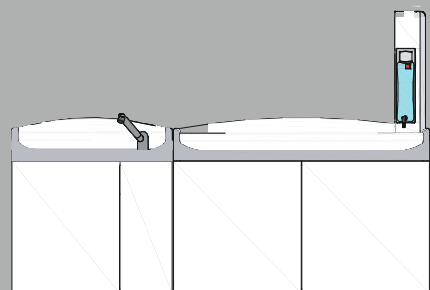


cod. FA 120 BS L1
Piano fasciatoio
da 120 cm
con bagnetto a sinistra ed
elemento riscaldante.
*Infant changing platform
120 cm, left basin,
temperature controlled
mattress.*

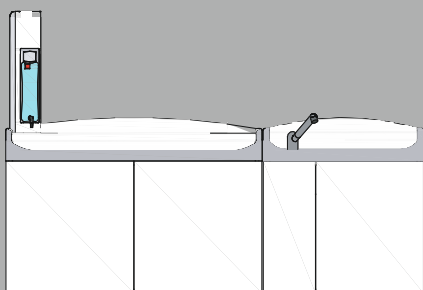


cod. FA 120 BD L1
Piano fasciatoio
da 120 cm
con bagnetto a sinistra ed
elemento riscaldante.
*Infant changing platform
120 cm, right basin,
temperature controlled
mattress.*

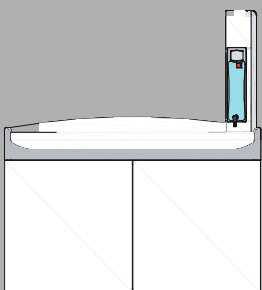


cod. FA 120 L1
Piano fasciatoio
da 120 cm con elemento
riscaldante.
*Infant changing platform
120 cm, temperature
controlled mattress.*

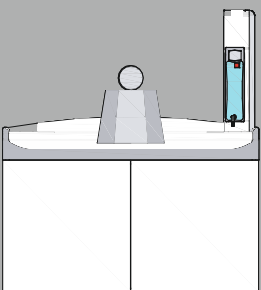


cod. FA 120 L1 B
Piano fasciatoio
da 120 cm con elemento
riscaldante e bilancia.
*Infant changing platform
120 cm, temperature
controlled mattress, built-in
weighing scales.*

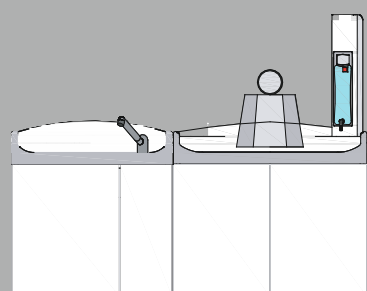


cod. FA 90 BS L1 B
Piano fasciatoio
da 90 cm
con bagnetto a sinistra ed
elemento riscaldante
con bilancia.
*Infant changing platform
90 cm, left basin,
temperature controlled
mattress, built-in weighing
scales.*

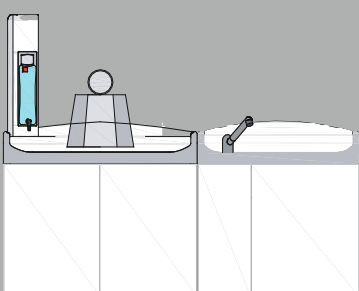

cod. FA 90 BD L1 B
Piano fasciatoio
da 90 cm
con bagnetto a destra ed
elemento riscaldante con
bilancia.
*Infant changing platform
90 cm, right basin,
temperature controlled
mattress, built-in weighing
scales.*

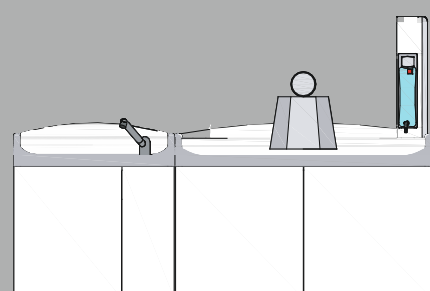

cod. FA 120 BS L1 B
Piano fasciatoio
da 120 cm
con bagnetto a sinistra ed
elemento riscaldante
con bilancia.
*Infant changing platform
120 cm, left basin,
temperature controlled
mattress, built-in weighing
scales.*

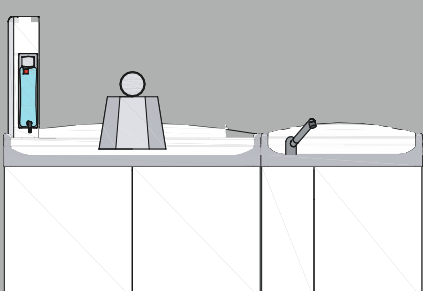

cod. FA 120 BD L1 B
Piano fasciatoio
da 120 cm
con bagnetto a destra ed
elemento riscaldante con
bilancia.
*Infant changing platform
120 cm, right basin,
temperature controlled
mattress, built-in weighing
scales.*

Favero Health Projects Spa
Via Schiavonesca Priula, 20
31044 Biadene di Montebelluna
Treviso-Italy

Tel +39 0423 6125
Fax +39 0423 612680
E-mail: info@favero.it
www.favero.it

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008
Azienda certificata UNI EN ISO 13485:2003

Ufficio Commerciale
Fax +39 0423 303433
uff.commerciale@favero.it

Ufficio Amministrativo
Fax +39 0423 612650
uff.amministrazione@favero.it

Ufficio Acquisti
Fax +39 0423 612646
uff.acquisti@favero.it

Export Dpt.
Fax +39 0423 600417
export.dpt@favero.it

- | | | |
|---|---|--|
| 0. Sistema Modulare Zerofire
<i>Zerofire Modular System</i> | 26. Cucinette piano
<i>Floor kitchenettes</i> | 58. Barelle rianimazione
<i>Resuscitation stretcher trolley</i> |
| 6. Degenza 3002
<i>General hospital bed 3002</i> | 41. Poltrone relax
<i>Relax armchairs</i> | 59. Barella emergenza
<i>Emergency stretcher trolley</i> |
| 7. Letti a colonna
<i>Column-mounted beds</i> | 42. Poltrone prelievi
<i>Specimen-collection chairs</i> | 60. Carrelli
<i>Carts and Trolleys</i> |
| 8. Accessori Ortopedia
<i>Orthopaedic accessories</i> | 43. Sedute ufficio
<i>Office seating</i> | 61. Carrelli Baydur
<i>Baydur carts</i> |
| 9. Accessori letti
<i>Bed accessories</i> | 44. Sedute mediche e dentistiche
<i>Medical and dental chairs</i> | 64. CarLo Carrelli Logistica
<i>CarLo Logistics carts</i> |
| 10. Comodini - Tavoli servitori
<i>Bedside cabinets - Overbed tables</i> | 49. Aambulatori specialistici
<i>Consulting clinics</i> | 68. CartEsio Carrelli
<i>CartEsio Carts</i> |
| 11. Letti ad altezza variabile Wing
<i>Adjustable height beds Wing</i> | 50. Ambulatori
<i>Consulting rooms</i> | 70. Over-tour carrello monoscocca
multifunzione
<i>Over-tour multi-purpose cart</i> |
| 12. Letti a colonna Entasis
<i>Column-mounted beds Entasis</i> | 51. Lettini visita H.V.
<i>Ht. Adj. Examination tables</i> | 72. Fasciatori - Culle e lettini
<i>Nappy changing units - Cradles and cots</i> |
| 14. Comodini Tender
<i>Bedside cabinets Tender</i> | 52. Letto rianimazione con pesatura
<i>ICU bed with weighing device</i> | 73. Fasciatoio
<i>Nappy changing units</i> |
| 17. Banconi
<i>Reception desks</i> | 53. Accessori sale operatorie
<i>Operating theatre accessories</i> | 81. Uffici
<i>Offices</i> |
| 20. Praxis
<i>Praxis</i> | 54. Barelle
<i>Stretcher trolleys</i> | 83. Cartella colori
<i>Colour chart</i> |
| 21. Armadi degenza
<i>Patient lockers</i> | 55. Letto rianimazione pediatrica
<i>Paediatric intensive care bed</i> | |
| 22. Armadi porta medicinali
<i>Medicine Cabinets</i> | 56. Letto rianimazione elettrico
<i>Electrically operated intensive care bed</i> | |
| 23. Armadi vetrina
<i>Glass-fronted cupboards</i> | 57. Letto rianimazione
<i>Intensive care bed</i> | |

La ditta si riserva di apportare
quelle modifiche tecniche ed estetiche che
ritiene più opportune,
anche senza preavviso.

*The firm reserves the right to make
any technical and aesthetic
changes it deems necessary,
without prior notice.*

